

Tulevaisuuden riippunilkkahoito!



a

ALFESS™

FUNCTIONAL
ELECTRICAL
STIMULATION
SYSTEM



ALFESS™

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

Esittelemme aivan uuden modernin Toiminnallisen sähköisen stimuloinnin (TSS) laitteen nimeltään ALFESS. Innovatiivinen ja hyvin muotoiltu ortoosi täydentää Allard AFO tuotesarjaa. ALFESS on tarkoitettu parantamaan kävelyä henkilöille, jotka kaipaavat mahdollisuutta jalan nostoon kävelyn aikana. Sähköinen stimulointi auttaa jalan aktiivisessa dorsifleksiossa. Tämä innovaatio on syntynyt yhteistyössä Camp Scandinavian tuotekehitystiimin ja valmistajan kanssa. He ovat luoneet meille täysin ainutlaatuisen, toiminnallisen ja mitä käyttäjäystävällisimmän ortoosin.



TOIMINNOT & EDUT

- Voidaan kiinnittää yhdellä kädellä
- Kevyt
- Ei näy vaatteiden alta
- Yksinkertainen laite ohjelmoitavaksi joko ohjauspaneelin tai applikaation avulla.
- Integroidut elektrodit (ei tarvitse tilata erikseen)
- Yksi laite - yksi koko - helppo tilata
- Mahdollistaa paljasjaloin kävelyn
- Vedenkestävä (lyhyen aikaa)
- Kaksi aktiveettiasetusta: Kävely ja Harjoitustila
- Latausyksikkö latausta varten integroidulla akulla.

Indikaatiot:

Keskushermoston vammat kuten:

Multippeli Skleroosi (MS), Aivohalvaus, CP-vamma, Osittaiset selkäydinvauriot, Traumaattiset aivovauriot.




ALFESS™

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

ALFESS asetetaan säärelle välittömästi polven alle. Kävelyn aikana sensorit tunnistavat tahdin sekä kulmat ja sopeutuvat kävelytyyliin. Algoritmi kokoaa tiedot ja lähettää sähköisiä impulsseja hermoille jalan nostamiseksi. Käyttäjä voi itse säätää toivotun stimuloinnin voimakkuutta. Harjoitustila auttaa käyttäjää tekemään kuntoutustaan yhdessä fysioterapeutin kanssa tai annetuilla ohjeilla itsenäisesti.



Asetukset voidaan tehdä joko laitteessa, ohjauspaneelissa tai mobiiliapplikaation avulla.

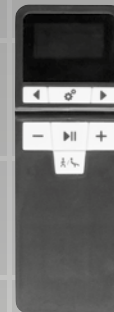

Kontraindikaatiot:

Älä käytä yhdessä sähköisten valvontalaitteiden kanssa, tahdistimen, defibrillaattorin ja korkea frekvensisten lääketieteellisten laitteiden kanssa. FES/ITTS hoitoa ei saa antaa tahdistinta käyttäville potilaille. Älä käytä, mikäli sinulla on ollut autonominen dysrefleksia. Älä käytä FES/ITTS:ää juuri suoritettun kirurgisen toimenpiteen jälkeen, kun lihassupistus voi haitata toipumisprosessia. Lisätietoja varovaisuustoimenpiteistä ja varoituksista koskien, lue ystävällisesti käyttöohjeet.

a

ALFESS™

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

*mikäli tämä ei auta,
suosittelemme
Allard AFOa!*



Tuotenro.	Kuvaus	Koko
28270 0512	ALFESS Pakkaus	Yksi koko
28271 0000	Pidennysnauha	Yksi koko
28279 0000	D-Rengas magneetilla	Yksi koko
28283 0000	Connect Geeli	500 ml.

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no