




Instrucciones de adaptación - Anleitung - Tilpasningsinstruktion - Οδηγίες εφέυρηση
 Fitting instructions - Sovitussuositukset - Instruções de adaptação - Istruzioni per
 l'adattamento - Montage-instructions - Tilpasningsinstruktion - Instruções de ajuste
 Instruções de adaptação - Instruções de regulação - Instruções de regulação

Alza para Walker AW
 Achilleskeile für Walker-Orthesen AW
 Hækkie til Walker AW
 Trosspørvio Walker AW
 Achilles wedges for Walkers AW
 Kantakilla Walkerin AW
 Talonnette pour Walker AW
 Rialzo per Walker AW
 Achilles wiggen voor Walkers AW
 Hækkie til Walker AW
 Podpłotka do buta marszowego AW
 Cunha para Bota Walker AW
 Sport de călăți pentru orteze Walker AW
 Akilleskil for Walkers AW

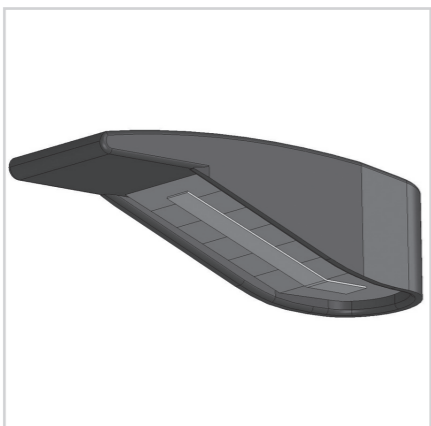

ES

INDICACIONES

Postoperatorio de reparación de tendón de Aquiles.

PRECAUCIONES


- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde lo haya adquirido.
- El Facultativo es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento.
- La adaptación del producto será efectuada por su Técnico ortopédico ó personal cualificado.
- Para una máxima eficacia deberá respetar la duración diaria de uso siguiendo las indicaciones de su Facultativo o Técnico Ortopédico.
- Para ejercer un efecto terapéutico completo, debe utilizar el producto con la talla adecuada.
- Esta ortesis no debe utilizarse para otro uso distinto al que se le haya precrito. No permita que los niños jueguen con este dispositivo.
- Debe informar a su facultativo si sufre afecciones cutáneas. Se debe evitar el uso de cremas de uso tópico durante el tratamiento.
- En las zonas de apoyo con presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible. No llevar puesta la ortesis durante el baño, ducha, etc.
- Comprobar periódicamente que las cuñas utilizadas estén correctamente adheridas entre sí y en buenas condiciones (sin grasa, cortes, desgarraduras, etc.).

INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN

1. Las alzas se colocan sobre la base de la ortesis Walker. Compruebe que la parte redondeada quede perfectamente ajustada contra la parte trasera del Walker, como señala la flecha en el dibujo. El producto dispone de un Velcro en la superficie para que pueda fijar sobre él la bota textil del Walker. Compruebe que quede el pie bien posicionado y fijo antes de caminar.
2. Para ajustar la altura, según las indicaciones del prescriptor:
 - a) Retire las capas desde la inferior hacia arriba. Cada capa del producto supone aproximadamente un ángulo de 4°, hasta un total de aproximadamente 20° para el producto completo.
 - b) Al ir quitando capas, recorte el Velcro macho sobrante.

MANTENIMIENTO DE LA ORTESIS - INSTRUCCIONES DE LAVADO

Limpiar con un paño húmedo. No usar lejías. No planchar. No lavado en seco. No secar en secadora. Se aconseja cuidar la limpieza de los Velcro, para conservar sus características de adhesión, eliminando hilos, pelusa, etc.

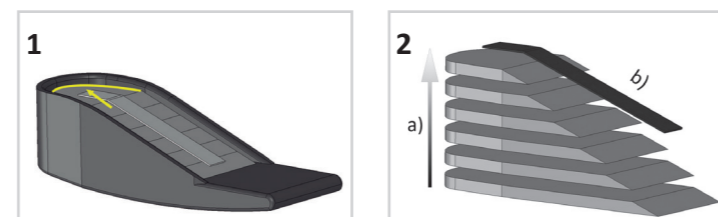

DE

INDIKATIONEN

Postoperative Achillessehnenreparatur.

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Orthese tragen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Fachhandel, von dem Sie die Orthese erhalten haben.
- Nur Ärzte sind qualifiziert, um die Orthese zu verordnen und die Behandlungsdauer zu bestimmen.
- Das Anlegen der Orthese sollte nur durch einen Techniker oder Fachpersonal durchgeführt werden.
- Für maximale Effektivität sollten Sie die Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer berücksichtigen. Beachten Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Orthopädietechnikers.
- Um die volle therapeutische Wirkung zu gewährleisten, müssen Sie die richtige Größe verwenden.
- Diese Orthese darf nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht mit der Orthese spielen.
- Sie müssen Ihren Arzt informieren, wenn Sie an Hauterkrankungen leiden. Vermeiden Sie Cremes während der Behandlung/Anwendung.
- Die Haut darf nicht beschädigt sein oder überempfindlich reagieren. Die Orthese darf nicht während des Badens, Duschens usw. getragen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Keile richtig zusammen verklebt sind und in guter Kondition sind (kein Fett, Schnitte, Risse, etc.).

ANLEITUNG

1. Die Keile sollten in der Basis der Walker-Orthese platziert werden. Stellen Sie sicher, dass die Rundung genau anlegt ist gegen die Fersen der Walker-Orthese, so wie durch den Pfeil in der Abbildung gezeigt. Das Produkt verfügt über ein Klettband auf der Oberseite, an dem Sie die Innenschuh aus Textil in der Walker befestigen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fuß vor dem Gehen richtig positioniert ist.
2. Einstellung der Höhe: Nur nach Anweisungen Ihres Arztes:
 - a) Immer die Schichten von unten nach oben entfernen. Jede Schicht des Keils repräsentiert einen Winkel von ca. 4° bis zu insgesamt etwa 20°, was der vollen Höhe des Produktes entspricht.
 - b) Nach dem Entfernen der erforderlichen Anzahl der Schichten, schneiden Sie das überschüssige Klettband weg.

WARTUNG DER ORTHESE - WASCHANLEITUNG

Reinigen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nicht im Trockner trocknen. Es ist ratsam den Klettverschluss frei von Fasern, Flusen usw. zu halten, um die optimale Klebeeigenschaften zu erhalten.

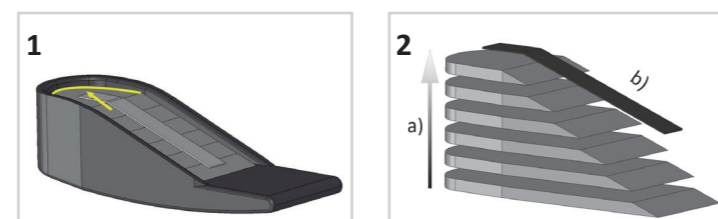

DK

INDIKATIONER

Efter operation af akillesenen.

FORSIGTIGHEDSREGLER


- Læs nøje igennem disse instruktioner før ortosen tages i brug. Hvis du har spørgsmål, ta` kontakt med lægen eller det personale som har tilpasset hælkilen.
- Kun en læge har kundskab til at kunne ordinere ortosen og fastsætte længden af behandlingen.
- Udprøvningen af ortosen skal udføres af en Bandagist.
- For maksimal effekt skal længden på den daglige behandlingen respekteres og instruktionen fra lægen eller Bandagisten følges.
- For at få maksimal effekt af behandlingen skal man bruge korrekt størrelse.
- Denne ortosen må kun bruges til det brugsområdet den er ordineret til. Lad ikke børn lege med produktet.
- Informer lægen hvis du mærker nogen hudforandringer. Undgå at bruge cremer for lokalbehandling når ortosen er i brug.
- Kontrollør at huden ikke skades der hvor ortosen ligger mod huden. Anvend ikke ortosen i badet, etc.
- Kontrollør regelmæssig at kilerne er ordentligt fastsat mod hinanden og at de er i god stand (ikke med hakker, ujævnheder, revner etc).

TILPASNINGSIKSTUKTION

1. Kilen skal placeres i walkerortosen. Vær opmærksom på at den runde del af kilen sidder tæt mod den bagerste dele af walkeren, som pilen viser på billedet. Produktet har en Walker strop på oversiden som den tekstile støvel i walkeren fæstes til. Forsikre dig om at foden ligger rigtig og er trygt placeret før du starter på at gå.
2. For at justere højden på kilen i henhold til lægens ordination:
 - a. Fjern altid lag fra bunden på kilen. Hvert lag på kilen repræsenterer en vinkel på ca. 4° op til totalt 20°, hvilket er den fulde højde på produktet.
 - b. Når det ønskede antal lag er fjernet, klip derefter de overflødigde Velcro bånd.

VEDLIGEHOLDELSE AF ORTOSEN – VASKEINSTRUKTION.

Tør ortosen af med en fugtig klud. Kan ikke bleges eller stryges. Kan ikke renses kemisk eller tørres i tørrertumbler. Hold velcro båndene fri for fiber, smuds etc. så fæstet opretholdes.

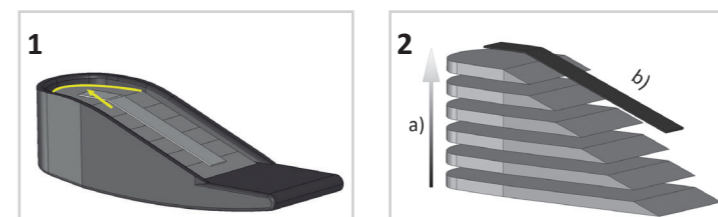

ENG

INDICATIONS

Postoperative Achilles tendon repair.

PRECAUTIONS


- Read these instructions carefully before using the orthosis. If you have any questions, consult your doctor or the shop where you purchased it.
- Only doctors are qualified to prescribe the orthosis and determine the duration of treatment.
- The fitting of the product should be carried out by your orthopaedic technician.
- For maximum effectiveness, you should respect the daily duration of use and follow the instructions of your doctor or orthopaedic technician.
- To ensure the full therapeutic effect, you must use the correct size.
- This orthosis must not be used for any other purpose than that prescribed.
- Do not let children play with this device.
- You must inform your doctor if you suffer from any skin conditions. Avoid using topical creams during treatment.
- In pressure bearing areas, the skin must not be damaged or hypersensitive. Do not wear the orthosis while having a bath, shower, etc.
- Regularly check that the wedges are properly adhered together and in good condition (no grease, cuts, tears, etc.).

FITTING INSTRUCTIONS

1. The wedges should be placed into the base of the walker orthosis. Make sure that the rounded part fits snugly against the back of the walker, as indicated by the arrow in the picture. The product features a Velcro strap on the top to which you can fasten the textile boot of the walker. Make sure that your foot is well positioned and secure before walking.
2. To adjust the height, as per the instructions of your doctor:
 - a) Always remove layers from the bottom up. Each layer of the wedge represents an angle of approximately 4°, up to a total of approximately 20°, which is the full height of the product.
 - b) After removing the required number of layers, trim the excess Velcro.

MAINTENANCE OF THE ORTHOSIS - WASHING INSTRUCTIONS

Clean with a damp cloth. Do not use bleach. Do not iron. Do not dry clean. Do not tumble dry. It is advisable to keep the Velcro free from fibres, fluff, etc., to maintain its adhesive properties.

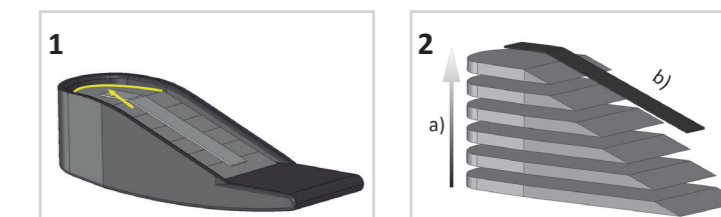

EL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Μετεγχειρητική αποκατάσταση του Αχιλλείου τένοντα.

Προφυλάξεις:


- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του κηδεμόνα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το κατάστημα από το οποίο τον αγοράσατε.
- Ο θεράπων ιατρός είναι το αρμόδιο άτομο για να συστήσει και ν' αποφασίσει τη χρονική διάρκεια της θεραπείας.
- Η προσαρμογή του προϊόντος θα γίνει από τον τεχνικό - ορθοπεδικό, ή ένα εξειδικευμένο άτομο.
- Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα πρέπει να ακολουθείτε πιστά την ημερήσια διάρκεια χρήσης του σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράπων ιατρού ή του Ορθοπεδικού σας.
- Για να πετύχετε ένα πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στο κατάλληλο μέγεθος.
- Αυτός ο κηδεμόνας δεν πρέπει να έχει άλλη χρήση εκτός από τη συνιστώμενη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό τον εξοπλισμό.
- Πρέπει να ενημερώσετε τον θεράπων ιατρό σας εάν παρουσιαστούν δερματικές αντιδράσεις. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κρεμών τοπικής εφαρμογής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Στα σημεία στήριξης με πίεση το δέρμα δεν πρέπει να είναι τραυματισμένο ή υπερευαίσθητο. Μην φοράτε το ορθωτικό πέλμα κατά τη διάρκεια του μπάνιου, του ντους κλπ.
- Ελέγχετε περιοδικά αν οι σφίγγες που χρησιμοποιούνται είναι σε σωστή επαφή μεταξύ τους και σε καλή κατάσταση (χωρίς λίπη, κοψίματα, σκισίματα, κλπ).

ΟΔΗΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Τα υποπτέρνια τοποθετούνται στη βάση του κηδεμόνα Walker. Ελέγξτε ότι το στρογγυλεμένο μέρος προσαρμόζεται τέλεια στο πίσω τμήμα του Walker, όπως δείχνει το βέλος στο σχέδιο. Το προϊόν διαθέτει ένα αυτοκόλλητο Velcro επιφανειακά έτσι ώστε να μπορείτε να στερεώσετε πάνω του την υφασμάτινη μπότα του Walker. Ελέγξτε ότι το πόδι είναι καλά τοποθετημένο και στερεωμένο πριν περπατήσετε.
2. Για να ρυθμίσετε το ύψος, ακολουθείστε τις οδηγίες του συνταγογράφου.
 - a) Αφαιρέστε τα στρώματα από κάτω προς τα πάνω. Κάθε στρώμα του προϊόντος προσθέτει μια γωνία περίπου 4° μέχρι το σύνολο των περίπου 20° που δίνει το πλήρες προϊόν.
 - b) Όταν αφαιρείτε τα στρώματα, κόψτε το αυτοκόλλητο Velcro που περισσεύει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ - ΟΔΗΓΕΣ ΠΛΥΣΗΣ:

Καθαρίστε με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα προϊόντα. Μην σιδερώνετε. Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Συνιστάται η φροντίδα των αυτοκόλλητων Velcro για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης τους αναλλοίωτα, αφαιρώντας κλωστές, χνούδια κλπ.

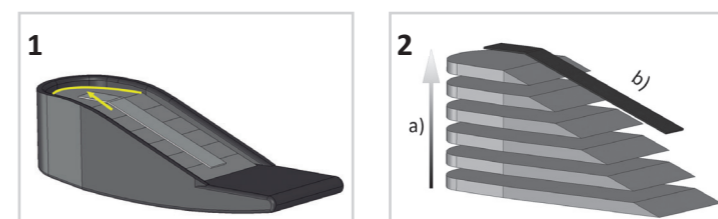

IU.434.2 08/05/2020 739236

INDICATIONS

Postopérateur de réparation du tendon d'Achille.

PRÉCAUTIONS


- Lisez avec soin ces instructions avant d'utiliser l'orthèse. En cas de doute, consultez votre médecin ou l'établissement où vous l'avez achetée.
- Seul le médecin est autorisé pour prescrire et décider de la durée du traitement.
- L'adaptation du produit sera réalisée par votre orthopédiste.
- Pour une efficacité maximale, vous devez respecter la durée quotidienne d'usage en suivant les indications de votre médecin ou orthopédiste.
- Pour un effet thérapeutique complet, vous devez utiliser le produit de la taille adéquate.
- Cette orthèse ne doit pas être utilisée pour un usage autre que celui pour lequel elle a été prescrite. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce dispositif.
- Veillez à informer votre médecin de toute affection cutanée. L'utilisation de crème à usage local doit être évitée pendant le traitement.
- Sur les zones d'appui par pression, la peau ne doit pas être blessée ni hypersensible. Ne portez pas l'orthèse pendant le bain, la douche.
- Vérifiez de manière périodique que les cales utilisées adhèrent bien ensemble et qu'elles soient en bon état (sans graisse, coupures, déchirures.)

INSTRUCTIONS D'ADAPTATION

- Les talonnettes se placent sur la base de l'orthèse Walker. Vérifiez que la partie arrondie soit parfaitement ajustée contre la partie arrière du Walker, comme l'indique la flèche du dessin. Le produit dispose d'un Velcro sur la surface afin de pouvoir y fixer la botte en textile du Walker. Vérifiez que le pied soit bien positionné et fixe avant de marcher.
- Pour ajuster la hauteur, selon les indications du prescripteur:
 - Retirez les couches depuis la partie inférieure vers le haut. Chaque couche du produit a plus ou moins un angle de 4°, pour un total d'environ 20° pour le produit complet.
 - En retirant des couches, découpez la partie du Velcro mâle en trop.

ENTRETIEN DE L'ORTHÈSE - INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Nettoyer avec un linge humide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec. Ne pas sécher en sèche-linge. Il est conseillé de bien procéder au nettoyage des Velcro, afin de conserver leurs caractéristiques d'adhésion, en supprimant les fils, peluches.

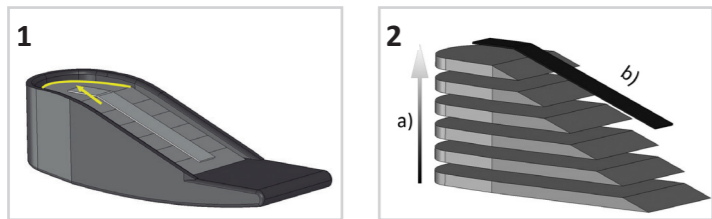**INDICAZIONI**

Post-operatorio per la ricostruzione del tendine di Achille.

AVVERTENZE


- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo tutore. In caso di qualsiasi dubbio, consultare il medico o il negozio dove è stato effettuato l'acquisto di questo tutore.
- Il medico è la sola persona autorizzata alla prescrizione ed alla decisione circa la durata del trattamento.
- L'adattamento o la modifica di questo tutore, deve essere effettuato solo da un tecnico ortopedico riconosciuto.
- Per la massima efficacia bisogna rispettare la durata d'uso quotidiana seguendo le indicazioni date dal medico.
- Per ottenere un effetto terapeutico corretto, bisogna utilizzare il prodotto nella taglia adeguata.
- Questo tutore non può essere utilizzato per un uso diverso da quello per cui è stato prescritto. Non permettere ad alcun bambino di giocare con questo dispositivo.
- Informare il proprio medico se si soffre di affezioni cutanee. Bisogna evitare l'utilizzo di creme ad uso topico durante il trattamento.
- Nelle zone di appoggio con pressione, la pelle non deve essere lesionata o ipersensibile. Togliere il tutore prima di effettuare operazioni come il bagno, la doccia, etc.
- Controllare periodicamente che i cunei utilizzati siano sempre correttamente connessi tra di loro ed in buone condizioni (nessun taglio, lacerazione, grasso etc.).

ISTRUZIONI PER L'ADATTAMENTO

- I cunei devono essere collocati sopra la base plantare del tutore Walker. Controllare che la parte arrotondata sia perfettamente appoggiata contro il profilo posteriore del tutore Walker, come segnalata dalla freccia nel disegno. Il prodotto è munito di un Velcro sulla sua superficie in maniera tale che sopra possa essere fissata l'imbottitura della parte tessile del Walker. Verificare che il piede sia ben posizionato e stabile prima di iniziare a camminare.
- Per regolare l'altezza dei cunei, seguire le indicazioni fornite dal medico prescrittore:
 - rimuovere sempre gli strati in eccesso partendo dal basso verso l'alto. Ogni strato del cuneo presenta approssimativamente un angolo di 4° sino ad arrivare ad un totale di circa 20° considerando il prodotto completo.
 - dopo avere rimosso gli strati necessari, tagliare il Velcro in eccesso.

MANTENIMENTO DEL TUTORE – ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Pulire con un panno umido. Non usare candeggina. Non stirare. Non lavare a secco. Non asciugare nell'asciugatrice. Si consiglia di curare la pulizia del Velcro per conservare le sue caratteristiche di adesione eliminando fili, pelucchi etc.

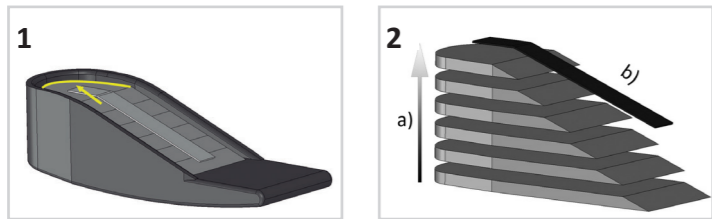**INDICATIES**

Postoperatieve Achilles tendon ruptuur.

VOORZORGSMAATREGELEN


- Lees deze instructies eerst zorgvuldig door voordat u de orthese in gebruik neemt. Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of de instrumentmaker bij wie u het product heeft gekocht.
- Alleen artsen zijn gekwalificeerd om de orthese voor te schrijven en de duur van de behandeling te bepalen.
- Het (aan)passen van de orthese dient door de orthopedisch instrumentmaker of assistent gedaan te worden.
- Voor maximale effectiviteit, dient de dagelijkse gebruiksduur gerespecteerd te worden en de instructies van uw arts of orthopedisch instrumentmaker nauwkeurig opgevolgd te worden.
- Om het volledige therapeutisch effect te garanderen, dient u de correcte maat te gebruiken.
- Deze orthese mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor voorgeschreven. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- U moet uw arts informeren als u huidaanandoeningen heeft. Vermijd het gebruik van crèmes tijdens de behandeling.
- In druk dragende gebieden, mag de huid niet beschadigd of overgevoelig zijn. De orthese mag niet gedragen worden tijdens het baden, douchen, etc.
- Controleer regelmatig of de wiggen nog goed op elkaar zitten en in goede conditie verkeren (geen vet, sneden, scheuren, enz.).

MONTAGE-INSTRUCTIES

- De wiggen dienen in de basis van de Walker-looporthese geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de ronde achterzijde van de wiggen goed tegen de achterzijde van de Walker aanliggen, zoals de pijl in de afbeelding toont. Op de bovenzijde van de wiggen zit een klittenbandstrook waarop de stoffen laars van de Walker bevestigd kan worden. Zorg dat de voet correct is gepositioneerd voordat u begint met lopen.
- Hoogte aanpassen, pas na goedkeuring van uw arts:
 - Altijd de lagen van onderaf verwijderen. Elke laag van de wig vormt een hoek van ongeveer 4 °, tot een totaal van ongeveer 20 °, hetgeen de volledige hoogte van het product is.
 - Na het verwijderen van het benodigde aantal lagen kunt u het overtollige klittenband inkorten.

ONDERHOUD VAN DE ORTHÈSE - REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen bleekmiddel. Niet strijken. Niet stomen. Niet in de droger. Zorg dat het klittenband vrij blijft van draadjes, pluizen, enz., om de optimale hechting te behouden.

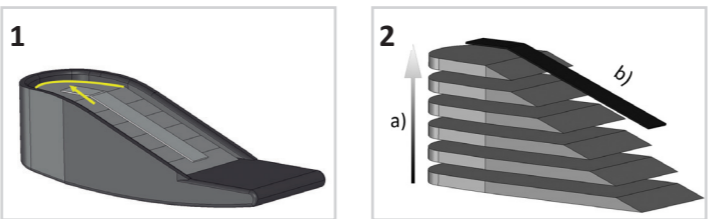**ZASTOSOWANIE**

Regeneracja pooperacyjna ścięgna Achillesa.

ZALECENIA


- Przed użyciem ortozy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym nabyto produkt.
- Decyzję w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortozy podejmuje lekarz specjalista.
- Produkt powinien zostać dopasowany przez technika ortopedycznego.
- W celu zapewnienia optymalnej skuteczności leczenia należy przestrzegać zaleceń lekarza specjalisty lub technika ortopedycznego dotyczących czasu codziennego użytkowania ortozy.
- Uzyskanie pełnego efektu terapeutycznego wymaga zastosowania produktu o odpowiednio dobranym rozmiarze.
- Orteza nie powinna być używana do innych celów niż przewidziane w zleceniu lekarskim. Nie należy pozwalać, aby bawiły się nią dzieci.
- Lekarz specjalista powinien zostać poinformowany o wystąpieniu ewentualnych zmian skórnych. Podczas leczenia nie używać kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadwrażliwa w miejscach podparcia narażonych na nacisk. Niedopuszczalne jest stosowanie ortozy podczas kąpieli, pod prysznicem, itp.
- Należy regularnie sprawdzać, czy poszczególne warstwy podpiętki pozostają ze sobą prawidłowo połączone i znajdują się w należytym stanie (bez zatłuszczeń, nacięć, rozdarć, itp.).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Umieścić kliny podpiętki wewnątrz buta marszowego, upewniając się przy tym, że ich zaokrąglona część idealnie przylega do zapiętka, tak jak to zostało ukazane na rysunku. Produkt został wyposażony w wierzchnią taśmę rzepową Velcro, która umożliwia przymocowanie części tekstylnej buta marszowego. Przed rozpoczęciem chodzenia, upewnić się, że stopa została ustawiona we właściwej pozycji i odpowiednio unieruchomiona.
- Aby zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty dopasować wysokość podpiętki, należy:
 - Rozpocząć usuwanie kolejnych jej warstw od położonej najniżej. Każda z nich odpowiada w przybliżeniu 4-stopniowemu zgięciu podszewowemu. Zastosowanie wszystkich klinów umożliwia ustawienie stopy pod kątem wynoszącym ok. 20°.
 - Usuwać kolejne warstwy, odpowiednio skracając górną część taśmy rzepowej Velcro.

PIELĘGNACJA ORTEZY - ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Czyszczyć za pomocą wilgotnej szmatki. Nie stosować wybielaczy. Nie prasować. Nie prać chemicznie. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Zalecane jest utrzymywanie taśmy rzepowej Velcro w należytym stanie czystości (usuwać wszelkiego rodzaju nitki, klacki, itp.) w celu zapewnienia jej odpowiedniej przyczepności.

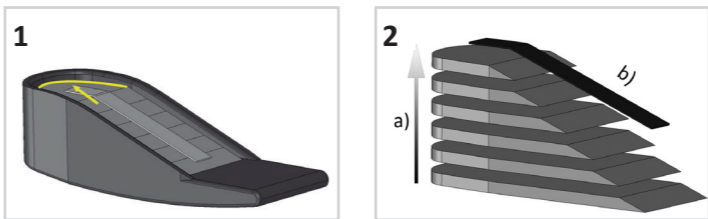**INDICAȚII**

Postoperator (tendonul lui Ahile).

PRECAUȚII


- Înainte de folosire citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Pentru întrebări adresate-vă medicului sau distribuitorului de unde ați achiziționat produsul.
- Singura persoană care poate recomanda folosirea acestei orteze și care poate decide durata tratamentului este medicul.
- Persoana calificată pentru alegerea și ajustarea produsului este tehnicianul ortoped.
- Pentru a obține eficiența maximă a ortezei trebuie să respectați durata zilnică și perioada de folosire prescrite de medic sau de tehnicianul ortoped.
- Pentru a obține o eficiență maximă, vă rugăm folosiți mărimea adecvată a produsului.
- Orteza nu trebuie folosită niciodată pentru altă afecțiune, decât cea prescristă de către medic.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă aveți orice afecțiune a pielii informați medicul. Evitați folosirea cremelor în timpul utilizării ortezei.
- Nu folosiți orteza dacă pielea din zonele sub presiune este hipersensibilă sau iritată. Nu folosiți produsul în timp ce faceți baie, duș etc.
- Verificați frecvent ca suporturile să stea fix unul peste celălalt și să fie intacte (fără crăpături, rupturi, grăsimi etc.)

INSTRUCȚIUNI DE REGLARE

- Suporturile trebuie plasate în talpa ortezei Walker. Asigurați-vă că părțile rotunjite se așează bine în locul destinat acestora (partea dorsală a ortezei, la călcâi), așa cum este indicat de săgeata din schema (1). Produsul este dotat cu o bandă velcro pe partea superioară pentru a putea fi fixat de talpa textilă a ortezei Walker. Asigurați-vă că piciorul dvs. a fost poziționat corect și stă fix în orteză înainte să călțați pe ea.
- Pentru a ajusta înălțimea conform indicației medicului:
 - Întotdeauna îndepărtați straturile începând de jos în sus. Fiecare strat al suportului reprezintă aproximativ 40, până la un total de 200, acesta fiind înălțimea maximă a produsului.
 - După îndepărtarea numărului necesar de straturi, tăiați banda velcro la lungimea potrivită.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE - CURĂȚARE

Curățați cu o cârpă umedă. Nu folosiți clor. Nu călțați. Nu curățați chimic. Nu ușați în uscătorul de rufe. Mențineți benzile velcro curate de impurități, fire etc. pentru a păstra proprietatea de aderență a acestora.

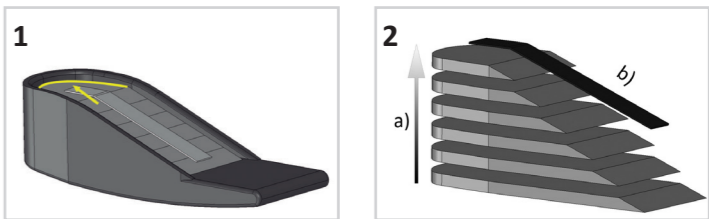**INDICAÇÕES**

Pós-operatório reparador do tendão de Aquiles.

PRECAUÇÕES

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a órtese. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- O médico é a pessoa habilitada para prescrever e determinar a duração do tratamento.
- A adaptação do produto deve ser efetuada pelo seu técnico ortopédico.
- Para uma eficácia ótima, deve respeitar a duração diária de utilização de acordo com as indicações do médico ou técnico ortopédico.
- Para obter um efeito terapêutico completo, deve utilizar um produto com o tamanho adequado.
- Esta órtese não deve ser utilizada para outra aplicação diferente da que tiver sido prescrita. Não deixe as crianças brincar com este dispositivo.
- Deve informar o seu médico se sofrer de afeções cutâneas. Deve evitar a utilização de cremes tópicos durante o tratamento.
- Nas zonas de apoio com pressão, a pele não deve estar lesionada nem ser hipersensível. Não use a órtese durante o banho, duche, etc.
- Comprove periodicamente se as cunhas utilizadas estão unidas corretamente entre si e em bom estado (sem gordura, cortes, rasgões, etc.).

INSTRUÇÕES DE ADAPTAÇÃO

- As cunhas são colocadas sobre a base da órtese Walker. Certifique-se de que a parte arredondada fica perfeitamente ajustada contra a parte traseira da bota Walker, conforme indica a seta na imagem. O produto dispõe de um Velcro na superfície para fixar a bota de tecido Walker. Certifique-se de que o pé está bem posicionado e fixo antes de caminhar.
- Para regular a altura segundo as indicações do prescritor:
 - Retire as camadas desde a inferior até a superior. Cada camada representa aproximadamente um ângulo de 4° até um total de aproximadamente 20° para a órtese completa.
 - Ao retirar camadas, corte o Velcro macho excedente.

MANUTENÇÃO DA ÓRTESE - INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Limpar com um pano húmido. Não usar lixívia. Não passar a ferro. Não lavar a seco. Não secar na máquina de secar roupa. Recomenda-se atenção na limpeza do Velcro para conservar as suas características de adesão, eliminando fios, colado, etc.

