



Gripper hinged knee

28128



28128 GRIPPER HINGED KNEE

Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA

Användningsområden/Indikationer

Lindrig knäledsinstabilitet

Kontraindikationer

Inga kända

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänts åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation




Foam, nylon, polyester och polypropylen.

Tvättinstruktion

Förslut alla kardborrband före tvätt. Tvättas med ett mildt tvättmedel utan blekmedel. Produkten skall lufttorkas.

Vid frågor

Om några problem uppstår, tag kontakt med utprovaren eller inköpsstället.

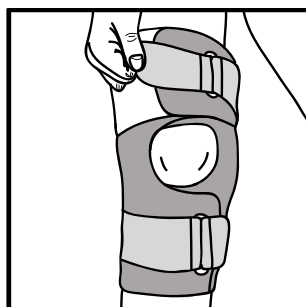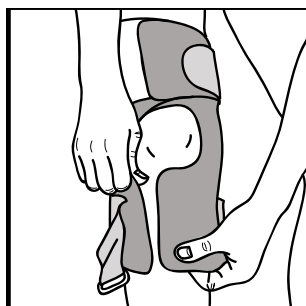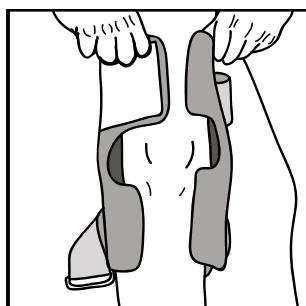

Instruktion

1. Lossa alla förslutningsband. Placera knäortosen så att öppningen försluts på framsidan av benet och så att uttaget för knäskålen är centrerad runt knäskålen (patella).

2. Fäst de breda, inre banden ovan och nedanför knät. Kontrollera att knäskålen är centrerad i förhållande till uttaget. Justera positionen vid behov.

3. Fäst de yttre nylonbanden över och under knät.

28128 GRIPPER HINGED KNEE

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

DANSK

Anvendelsesområde/Indikationer

Mild knæledsinstabilitet.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis nogen former for irritation eller hudproblemer opstår, skal bandagen straks tages af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation




Foam, nylon, polyester och polypropylen.

Vaskeinstruktion

Vaskeinstruktioner: Luk alle velcrobånd inden vask. Vaskes med et mildt vaskemiddel uden blegemidler. Bandagen skal luftørre.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål skal du kontakte forhandleren som har solgt produktet til dig.

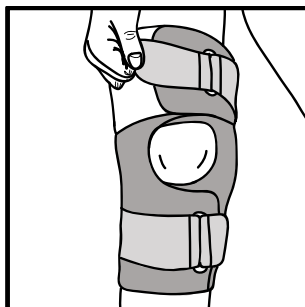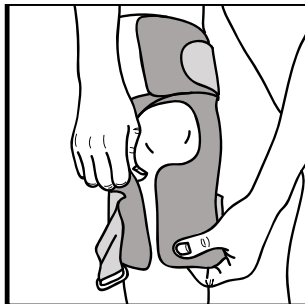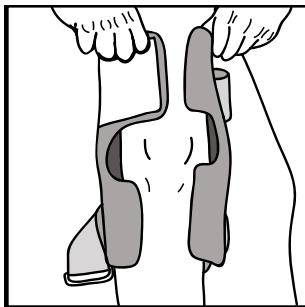

Instruktion

1. Løsn alle velcrobånd. Placer knæortosen så åbningen lukkes på forsiden af benet og åbningen til knæskallen (patella) sidder midt omkring knæskallen.
2. Luk de brede inderste bånd oven- og nedenfor knæet. Kontroller at knæskallen er placeret midt i åbningen. Juster positionen efter behov.
3. Luk de yderste nylonbånd over og under knæskallen.

28128 GRIPPER HINGED KNEE

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä!

SUOMI

Käyttöalueet/indikaatiot

Kondromalasia, luksoitunut tai subluksoitunut patella.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali




Vaahtomuovi, nylon, polyesteri ja polypropyleeni.

Pesuohteet

Pesuohteet: Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Pese miedolla pesuaineella, jossa ei ole valkaisuainetta. Anna ilmakuivua.

Kysyttävää

Jos käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

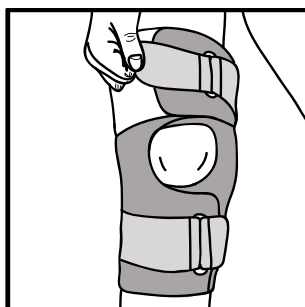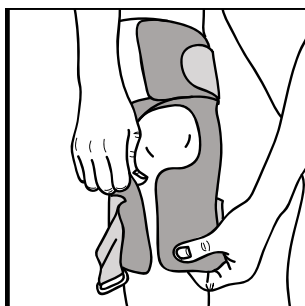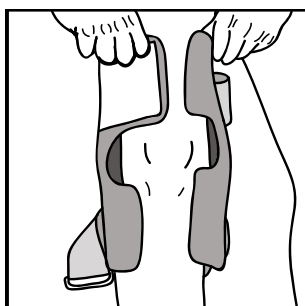

Pukemisohteet

1. Avaa ortoosi täysin avonaiseksi. Aseta se jalanympäriille niin, että kiinnitysosat ovat jalan etupuolella ja että patella-aukko sijoittuu keskelle polvilumpiota.

2. Kiinnitä leveät polven ylä- ja alapuolella olevat tarranauhat. Tarkista, että polvilumpio on patella-aukko keskellä. Säädä tarvittaessa.

3. Kiinnitä päällimmäiset, polven ylä- ja alapuolella olevat nailonauhat.

28128 GRIPPER HINGED KNEE

Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk!

NORSK

Bruksområder/Indikasjoner

Lett instabilitet i kneet.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av helsefaglig, kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes til for hardt. Ta straks av ortosen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon




Foam, nylon, polyester og polypropylen.

Vaskeinstruksjon

Lukk alle borrelåsene før vask. Vaskes i mildt såpevann uten blekemiddel. Luft-tørkes.

Ved spørsmål

Ta kontakt med utprøveren din eller innkjøpsstedet om det oppstår problemer.

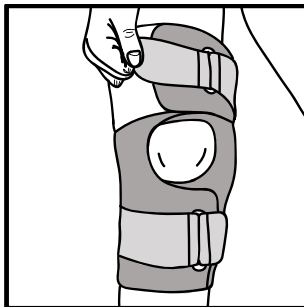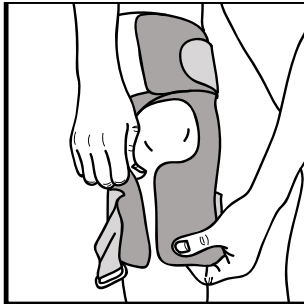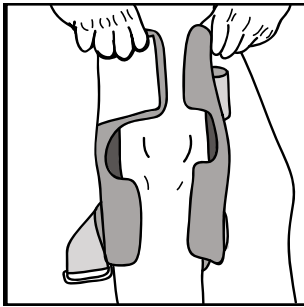


Instruksjon

1. Løsne alle båndene. Plasser kneortosen slik at åpningen lukkes på framsiden av benet og åpningen for kneskålen er sentrert rundt kneskålen (patella).
2. Fest de brede, indre båndene over og nedenfor kneet. Kontroller at patella er sentrert i forhold til åpningen. Juster posisjonen ved behov.
3. Fest de ytre nylonbåndene over og under kneet.

Med Spec Item No.	Size	CM
117031	X-Small	25-30 cm
117032	Small	30-35 cm
117034	Medium	35-40 cm
117035	Large	40-45 cm
117036	X-Large	45-50 cm
117037	XX-Large	50-55 cm
117038	XXX-Large	>55 cm



Medical Specialties, Inc.
 4600-K Lebanon Rd.
 Charlotte, NC 28227
 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
 e-mail: request@medspec.com
 www.medspec.com

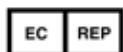

MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany

Importör & Distributör Skandinavien:
 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
 SE-254 67 Helsingborg, Sweden
 Phone +46 42 25 27 01

CAMP[®]
SCANDINAVIA

SVRIGE
 Tel 042-25 27 00
 E-post info@camp.se

DANMARK
 43 96 66 99
 info@camp.dk

FINLAND
 09-350 76 30
 info@camp.fi

NORGE
 23 23 31 20
 info@camp.no