

# PatellaVator

28674





**Användningsområden/Indikationer**

Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

**Kontraindikationer**

Inga kända.

**Justering**

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal

**Varning**

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.




Polypropylen, nylon, polyester, mässing, resår, polyurethan foam, polyurethan polymer.

**Tvättinstruktion**

Tvättinstruktioner: Maskintvätta på skontvätt 40° Plantorka.

**Vid frågor**

Om problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller återförsäljaren.

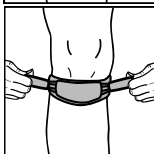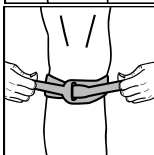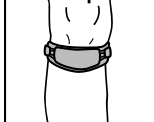**Materialspecifikation****Instruktion**

1. Lossa yttre snörningen från basbandet. Placera Patellavator knäortos så att MedSpec loggan är placerad med rätt sida upp, precis under patella (knäskålen).
2. Stick in det snedskurna bandet genom skåran bakom knäet och fäst de båda kardborrebanden omlott.  
OBS! Dra igenom bandet helt och hållet (så att inget kardborrematerial ligger mot huden). Om det blir för stramt, välj en större storlek.
3. Dra den yttre snörningen till en stram passform och fäst sedan mot basbandet.

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

### Anvendelsesområder/ Indikationer

Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sygdom, Chondromalacia Patella.

### Kontraindikationer

Ingen kendte.

### Justering

/Endringer af dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

### Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer med anvendelsen af bandagen, tages bandagen straks af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

### Materialespecifikation


Polypropylen, nylon, polyester, messing (øjer), elastik, polyuretan polymer.

### Vaskeinstruktion

Vaskeinstruktioner: Maskinvask på skånevask 40°. Liggetørring.

### Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer med anvendelse af bandagen, skal du straks tage bandagen af og kontakte din forhandler, eller den der har udleveret bandagen til dig.

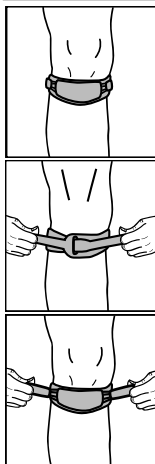

## Instruktion

1. Løsn den ydre snøring fra selve bandage-båndet. Placer Patellavator knæortose så MedSpec-logoet er placeret med den rigtige side op, placeret direkte under Patella (knæskallen).
2. Stik det skrånede bånd gennem løkken bag knæet og luk velcrobåndene mod hinanden. OBS! Træk båndet helt igennem (så der ikke vender noget velcromateriale ind mod huden). Hvis det bliver for stramt vælges en størrelse større.
3. Træk den ydre snøring til en stram pasform og sæt det derefter fast på selve bandage-båndet.

**Käyttöalueet/indikaatiot**

Patellan tendiniitti, Osgood-Schlatters sairaus, Patellan kondromalasia.

**Kontraindikaatiot**

Ei ole.

**Säätäminen**

Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

**Varoitus**

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

**Materiaali**




Polypropyleeni, nylon, polyesteri, messinki, resori, polyuretaanivahto, polyuretaani polymeeri.

**Pesuohjeet**

Pesuohjeet: Hienopesu koneessa 40°C asteessa. Tasokuivaus.

**Kysyttävää**

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

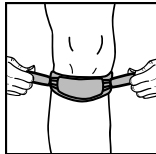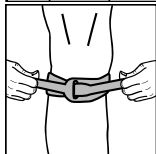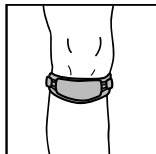

## Sovitusohjeet

1. Avaa päällimmäiset nauhat tuesta. Aseta Patellavator polviortoosi siten, että MedSpec logo osoittaa suoraan eteenpäin juuri patellan (polvilumpio) alapuolella.
2. Työnnä vinosti leikattu nauha tuen takana sijaitsevasta lenkistä läpi ja kiinnitä molemmat tarranauhat tuen ympärille kiinni.  
HUOM! Vedä molemmat tarranauhat niin, että ne eivät hankaa ihoa vasten. Jos tuki tuntuu liian tiukalta vaihda tuki kokoa suurempaan.
3. Vedä päällimmäisiä nauhoja sivusuuntaisesti, kunnes tunnet sopivan paineen polven etupuolella. Lopuksi kiinnitä tarranauhat.

### Bruksområder/ Indikasjoner

Patella tendinitt, Osgood-Schlatters sykdom eller Chondromalacia Patella.

### Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

### Justering

Endringer på dette produktet må kun gjøres av fagkyndig personale.

### Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes for hardt. Ta umiddelbart av ortosen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

### Materialspesifikasjon




Polypropylen, nylon, polyester, messing, elastikk, polyuretan skum, polyurethan og polymer.

### Vaskeinstruksjon

Vaskeanvisning: Maskinvask på finvaskprogram i 40°. Tørkes flatt.

### Ved spørsmål

Om det oppstår problemer, ta av ortosen og kontakt tilpasseren og stedet du kjøpte/fikk ortosen.

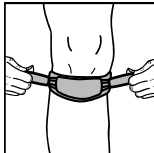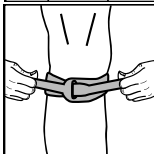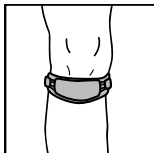

## Instruksjon

1. Løsne den ytre snøringen fra basisbåndet. Plasser Patellavator kneortose slik at MedSpec logoen er plassert med riktig side opp, rett under patella (kneskålen).

2. Stikk det skrånkjærte båndet inn gjennom sporet bak kneet og fest begge borrelåsene over hverandre. OBS! Dra båndet helt igjennom (slik at det ikke ligger noe borrelåsmateriale direkte mot huden). Om det blir for stramt, velg en størrelse større.

3. Dra den ytre snøringen til en stram passform, og fest så til basisbåndet.



Med Spec Item No.	Size	CM
223622	Small	27,5-32,5 cm
223624	Medium	32,5-38,5
223625	Large	38,5-43,5 cm
223626	X-Large	>43,5



Medical Specialties, Inc.  
 4600-K Lebanon Rd.  
 Charlotte, NC 28227  
 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
 e-mail: request@medspec.com  
 www.medspec.com



MDSS GmbH  
 Schiffgraben 41  
 30175 Hannover, Germany

Importör & Distributör Skandinavien:  
 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38  
 SE-254 67 Helsingborg, Sweden  
 Phone +46 42 25 27 01

**CAMP**<sup>®</sup>  
**SCANDINAVIA**

SVERIGE  
 Tel 042-25 27 00  
 E-post info@camp.se

DANMARK  
 43 96 66 99  
 info@camp.dk

FINLAND  
 09-350 76 30  
 info@camp.fi

NORGE  
 23 23 31 20  
 info@camp.no