

BOSTON SOFT AFO - Teknisk informasjon(SE)

BOSTON SOFT AFO - Teknisk informasjon(DK)

BOSTON SOFT AFO - Teknisk informasjon(FI)

SE

Boston Soft AFO är ett enklare alternativ till en individuellt anpassad AFO. Den kan användas både på vänster och höger fot. Ortosen är lätt, bekväm och fullt justerbar. Ortosen är avsedd för förbättring av fotens position hos patienter som inte är uppegående.

Boston Soft AFO finns i sex barnstorlekar och sex vuxen storlekar. Som tillval finns ett anti-rotationstag för stabilisering.

Indikationer

Boston Soft AFO är användbar för flera olika tillstånd, inkluderat:

Myelomeningocele
Muscular Dystrophy
Cerebral Palsy
Trauma
Hälsår
Postoperativt

Mått för AFO

Soft AFO storlek väljs utifrån patientens skostorlek.

Utprovning av Soft AFO

Rekommendera patienten att använda en tunn bomullssock under Soft AFO. Om patienten har Soft AFO på båda fötterna, markera dem då det kan kräva lite olika justeringar för varje fot.

Bøj patientens knä i 90° när AFO:n skall tas på och för hälen bakåt i ortosen. Lyft försiktigt upp tårna för att kontrollera att hälen är placerad ända bak i häldelen av ortosen.

Fäst ankelbandet först, sedan vadbandet och slutligen fotbandet. Kontrollera att alla banden är ordentligt fästa. Om AFO:n behöver trimmas, markera trimlinjen på AFO:n med en penna. Tag av AFO:n och klipp bort överflödigt material.

När patienten har använt AFO en kort period, tag av ortosen och kontrollera att det inte finns tryckmärken på huden.

Skötsel av AFO

Soft AFO kan rengöras med tvål och vatten. Ortosen torkas sedan torr med en handduk eller låt lufttorka.

DK

Boston Soft AFO er et enklere alternativ end en individuelt tilpasset AFO. Den kan anvendes både til venstre og højre fod. Ortosen er let, bekvemmelig og fuld justerbar. Ortosen er lavet for forbedring af fodens position hos patienter som ikke er oppegående.

Boston Soft AFO findes i seks børnestørrelser og i seks voksenstørrelser. Som en mulighed findes der et antirotationsgreb for stabilisering.

Indikationer

Boston Soft AFO kan benyttes i forskellige anvendelsesområder/diagnoser

inkluderet:
Myelomeningocele
Muskelsvind
Cerebral parese
Trauma
Hælsår
Postoperativt

Mål til AFO

Soft AFO størrelse bestemmes ud fra patientens skostørrelse.

Afprøvning af Soft AFO

Anbefal patienten at bruge en tynd bomuldssok under Soft AFO. Hvis patienten har Soft AFO på begge fødder, skal du markere dem, da det kan kræve lidt forskellige justeringer for hver fod.

Bøj patientens knæ i 90°, når AFO:n tages på skub hælen tilbage i ortosen. Løft forsigtigt tærerne op for at kontrollere hælen er placeret helt tilbage i hældelen i ortosen.

Spænd først ankelbåndet, derefter legbåndet og til sidst rundt om foden. Kontroller at alle bånd er korrekt spændte. Hvis AFO:n behøves at trimmes, marker trimlinjen på AFO:n med en tusch. Tag AFO:n af og klip dette overskydende materiale af.

Når patienten har anvendt AFO en kort periode, tag ortosen af og kontroller at der ikke er nogen trykmærker på huden.

Vedligeholdelse af AFO

Soft AFO kan rengøres med sæbe og vand. Derefter tørres ortosen med et håndklæde eller lufttørres.

NO

Boston Soft AFO er et enklere alternativ til en individuelt tilpasset AFO. Den kan brukes både på venstre og høyre fot. Ortosen er lett, behagelig og fullt justerbar. Ortosen er beregnet til forbedring av fotens posisjon hos pasienter som ikke er oppegående.

Boston Soft AFO finnes i seks barnestørrelser og seks voksenstørrelser. Som ekstrautstyr finnes et anti-rotasjonstag for stabilisering.

Indikasjoner

Boston Soft AFO kan brukes ved flere ulike tilstander, inkludert:

Myelomeningocele
Muskulær Dystrofi
Cerebral Parese
Traume
Hælsår
Postoperativt

Mål for AFO

Soft AFO størrelse velges ut i fra pasientens skostørrelse.

Utprovning av Soft AFO

Anbefal pasienten å bruke en tynn bomullssokk under Soft AFO. Om pasienten har Soft AFO på begge føttene, merk dem da det kan kreve litt ulike justeringer for hver fot.


Bøy pasientens kne i 90° når AFO'en skal tas på, og før hælen bakover i ortosen. Løft forsiktig opp tærne for å kontrollere at hælen er plassert helt bak i hældelen av ortosen.

Fest ankelbåndet først, deretter leggbåndet og til slutt fotbåndet. Kontroller at alle båndene er ordentlig festet. Om AFO'en må trimmes, merk trimlinjen på AFO'en med en penn. Ta av AFO'en og klipp bort overflødig materiale.

Når pasienten har brukt AFO'en en kort periode; ta av ortosen og kontroller at det ikke er trykkmerker på huden.

Vedlikehold av AFO

Soft AFO kan rengjøres med såpe og vann. Ortosen tørkes så med et håndkle eller lufttørkes.

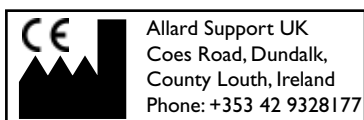

Distributed in Scandinavia by:
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg,
Sweden
Phone: 46 42 25 27 01

BOSTON SOFT AFO - Tekniset tiedot(FI)

BOSTON SOFT AFO - Technical Sheet(ENG)

FI

Boston Soft AFO on yksinkertaisempi vaihtoehto yksilölliselle AFO:lle. Sitä voidaan käyttää sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. Ortoosi on kevyt, mukavantuntainen ja täysin säädettävä. Ortoosi on tarkoitettu jalan asennon parantamiseksi henkilöille, jotka eivät kävele.

Boston Soft AFO:a on saatavana kuusi eri kokoa lapsille ja aikuisille. Lisätuen saamiseksi voidaan ortoosiin myös saada kiertoliikettä estävä ominaisuus.

Indikaatiot

Boston Soft AFO sopii käytettäväksi useiden eri tilojen hoitamisessa mukaan lukien:

Myelomeningoseele

Lihasdystrofia

Cerebral pares

Trauma

Kantapään haavaumat

Postoperatiivisesti

Soft AFO:n mittaaminen

Soft AFO valitaan saman koon mukaan kuin asiakkaan kengänkoko.

Soft AFO:n sovittaminen

Pyydä asiakasta käyttämään ohutta puuvillasukkaa Soft AFO:n alla. Jos asiakkaalla on Soft AFO molemmissa jaloissa merkitse puolet, sillä eri jalat voivat vaatia hieman erilaiset säädöt.

AFO:a pukiessa taivuta asiakkaan polvi 90° kulmaan ja työnnä kantapää ortoosiin. Nosta varpaita varovasti ylöspäin varmistaaksesi, että kantapää on varmasti paikallaan ortoosin takaosassa.

Kiinnitä nauhat ensin nilkan ympärille, sitten pohkeen ja viimeiseksi jalan ympärille. Tarkista, että nauhat ovat hyvin kiinni. Jos AFO:a pitää lyhentää merkkää leikattava kohta kynällä. Riisu AFO jalasta ja leikkaa ylimääräinen osa pois.

Kun asiakas on käyttänyt AFO:a jonkin aikaa riisu se jalasta ja tarkista, että asiakkaan jalkaan ei ole jäänyt painaumuksia.

Soft AFO:n hoito-ohjeet

Soft AFO voidaan pestä pesuaineella ja vedellä. Kuivaa ortoosi pesun jälkeen pyyhkeellä tai ilmakeivata se.

ENG

The Boston Soft AFO is an inexpensive alternative to custom AFO's. It can be used on either the left or right foot. It is lightweight, comfortable and fully adjustable.

The Soft AFO is used for non-ambulatory patients to enhance foot positioning. The Soft AFO is available in six Paediatric sizes and six adult sizes. An optional anti-rotational stabilizer is also available if required.

Indications

The Boston Soft AFO is useful for a number of conditions including:

Myelomeningocele

Muscular Dystrophy

Cerebral Palsy

Trauma

Heel Ulcerations

Post-Surgery

Measurement for AFO

The Soft AFO is selected based on the patient's shoe size.

Fitting the Soft AFO

It is advisable to wear a high cotton sock under the Soft AFO. If the patient has an AFO for each foot mark them as they may require slightly different adjustments for each foot.


When putting on the AFO bend the patient's knee to 90° and push their heel back into the AFO. It can help to gently lift the toes upward to check that the heel is right down in the heel section of the AFO.

Fasten the ankle strap first, then the calf strap and finally the foot strap. Make sure all the straps are fastened securely. If the AFO needs to be trimmed mark the trim line on the AFO with a pen/pencil, remove the AFO and using a pair of scissors trim off the excess material.

After the patient has been wearing the AFO for a short period of time remove the AFO and check the skin for any pressure marks.

Care of AFO

The Soft AFO can be cleaned with a soap and water and dried with a towel or left to dry naturally.

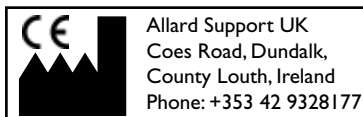

Distributed in Scandinavia by:
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg,
Sweden
Phone: 46 42 25 27 01