

CAMP[®]

Humerux

humerusortoosi, joka tarjoaa maksimaalisen kontrollin ainutlaatuisen vetorakenteensa ansiosta.

**traction
system[®]**



Humerux

humerusortoosi tarjoaa maksimaalisen kontrollin ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta.

Ortoosi on tarkoitettu käytettäväksi diafyseaalisen humerusmurtuman hoidossa, postoperatiivisessa murtumahoidossa ja tueksi toipumisen aikana.




▲ **Y-vetorakenne toimii vetolaitteen tavoin lisäen ja säätelemään kiristystä**, mikä auttaa maksimoimaan kontrollia humeruksen linjauksen ja paikallaan pysymisen sekä immobilisoinnin suhteen.



Ytraction system

▲ **Tekstiili joka hengittää ja on pehmeä ihoa vasten!**

100% LATEX FREE ✓

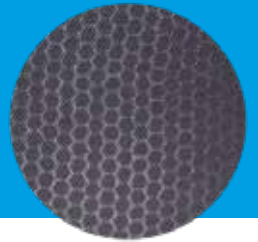

▲ Levyt ja nauha mahdollistavat yksilöllisen istuvuuden ja sirkulaarinen muoto varmistaa pehmytkudosten kompression ja nämä yhdessä stabiloivat humerusta.

Tunnettu Sarmiento-periaate antaa optimaalisen kompression pehmytösten ympärille. Levyt voidaan muovata anatomiseen muotoon tarvittaessa lämmittämällä*.




▲ Helposäätöinen rintahihna estää ortoosin liukumisen alas. Kainalossa on pehmuste mukavuuden lisäämiseksi.

▲ Huomaamaton, yksinkertainen, mukava ja pitävä säätö kolmella matalaprofiilisella tarranauhalla, jotka kulkevat kaksoissolkien kautta.

*Poista lämpömuokattavat muovilevyt ortoosista, lämmitä varovasti lämpöpuhaltimella noin 150°C 15 cm:n etäisyydeltä.

Tuotenro.	Koko	Pituus	Ympärysmitta
62105 0011	Small	37 cm	18 - 26 cm
62105 0012	Medium	38 cm	26 - 34 cm
62105 0013	Large	41 cm	34 - 42 cm
62105 0014	X-Large	42 cm	42 - 50 cm

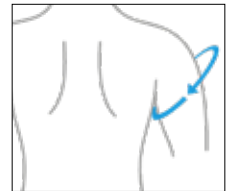

CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no