

Method TA™ AFO



METHOD TA™



Method TA™ AFO

Method TA™ AFO on valmisortoosi. Ortoosi on yksilöllisesti sovitettava. Sitä voidaan käyttää moniin aivohalvauksesta johtuviin tiloihin muun muassa CP:ssä, MMC:ssä, CMT:ssä ja muissa neuromotorisissa häiriöissä.

Käyttöalueet:

CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT ja muut neuromotoriset häiriöt, jotka aiheuttavat seisonta vaiheessa kävelyhäiriötä.

Kontraindikaatiot:

Potilaan paino yli 100 kg (220lbs)

*Korkeampi painoraja mukana tulevan Heavy Duty Stirrupin kanssa.

Ominaisuudet


1. Helppo pukea puhdistettava tibiaalihna peukalolenkin ja staattisen liukumisen eston kanssa, mahdollistavat pukemisen yhdellä kädellä.
2. Liankestävät, säädettävät ja siirrettävät pehmusteet tarjoavat mukavuutta koko päivän ajan.
3. Edistynyt prepreg-hiilikuitu hyödyntämään Triple Action® monitoimi-nilkanivelä.
4. Jäykkä etukuori sivukomponentilla ja supramalleolaarisella jatkeella vähentävät jalkojen ja nilkkojen asentohäiriötä.
5. Premium Triple Action® monitoimi-nilkanivel itsenäisellä kohdistuksella, vastuskynnyksen säädöllä ja säädettävällä jousijäykkyydellä.
6. Prepreg-litteä jalkapohja sopii potilaan kenkään ja tarjoaa rullaavan liikkeen ja energian palautuksen tehokkaampaan kävelyyn.
7. Heavy Duty Stirrup parantaa jäykkyyttä ja kestävyyttä.



Säätömenettely

Method TA™ tukee Beckerin Systematic Tuning Procedure™ -säätömenettely Triple Action® nilkkanivelille yksinkertaisin ohjein nopeaan sovitukseen ja optimointiin.

Tutkimukseen perustuva säätömenetelmä standardoi ja yksinkertaistaa säätöprosessia, tarjoten tehokkaan ortoosin, jonka terveydenhuollon ammattilaiset voivat sovittaa nopeasti ilman teknisiä viiveitä, jotka voivat häiritä potilaan hoitoa.

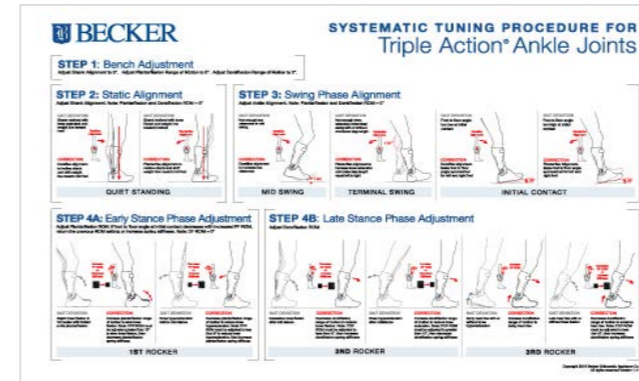

Lisätietoa saat skannaamalla QR-koodin.
← Systematic Tuning Procedure™ PDF.



Tilauksen tiedot

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik	Koko	Kengän koko	AFO Korkeus	Jalkapohjan pituus	Painoraja
625851013	Method TA™	Vasen	Large	Miehet: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625852013	Method TA™	Oikea	Large	Miehet: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625851011	Method TA™	Vasen	Small	Naiset: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)
625852011	Method TA™	Oikea	Small	Naiset: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)

Käytä vain ohjeiden mukaan. Katso IFU täydellisiä turvallisuustietoja, indikaatioita, vasta-aiheita ja varotoimia varten.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no