

## BOSTON LITE™

Täysin uudenlainen  
versio Soft Brace:sta!

- Uusi design
- Ohut
- Kevyt
- Joustava
- Erillinen sisäosa
- Ilmava materiaali
- Integroidut soljet



**Boston LITE™** on jatkokehitetty versio tavallisesta Soft Brace:sta, joka on ollut markkinoilla useiden vuosien ajan.


Uuden tekniikan ansiosta korsetti on ohuempi ja samalla ilmavampi, mutta silti yhtä stabiili kuin ennen.

Boston LITE on saanut uusia toimintoja sillä, että vahvistusmateriaali "leivotaan" muovin sisään ja siten reiät ovat mahdollista tehdä näiden eri vahvistussegmenttien lävitse.

Korsetti toimitetaan erillisen sisäpehmusteen kanssa, joka valmistetaan "3D-Spacer"-verkkokankaasta. Kangas pitää pois kosteuden ja kuumuuden pitäen ihon viileän ja kuivan tuntuksena. Samalla se toimii pehmusteena ja jakaa paineen tasaisesti keholle. Pehmustetta käytetään tavallisen aluspaidan sijaan.

Solkia on kehitetty kosmeettisempaan suuntaan niin, että ne ovat matalaprofiiliset ja tyylikkäämmän näköiset.

*Boston LITE:n kiinnitys on saatavana ainoastaan taakse.*

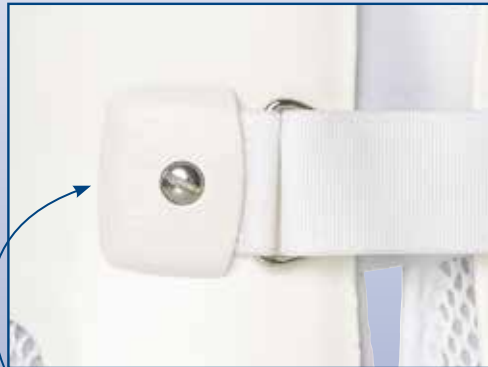

*Uudenlaiset matalaprofiiliset soljet ja tyylikäs ulkonäkö edustaa kosmeettisempää designia*



*Korsetin joustava ja ohut rakenne jättää tilaa paksummalle pehmusteelle.*

# BOSTON LITE™

**Täysin uudenvuotinen versio Soft Brace:sta!**



ALKUPERÄINEN

# BOSTON SOFT BODY JACKET

Esivalmistettu korsetti, joka on tarkoitettu potilaille, joilla lihasvoima on alentunut, vartalon kontrolli on heikko tai jotka eivät muusta syystä voi käyttää kovaa ortoosia. Moduulin ulkopuoli on valmistettu hieman kovemmasta polyeteenistä kuin sisäpuoli. Valkoisessa perusmoduulissa, jota on saatavana 30 kokoa, on 15° lordoosikulma, kiinnitys takana sekä avokanavat. Boston Soft Body Jacketia voi tilata myös muun väriseinä, eri lordoosikulmilla ja avo- tai umpikanavilla. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa.



Boston Soft Body Jacketia voidaan nyt myös tilata integroidulla kehikkorankenteella tai irrotettavalla kehikolla. Käyttämällä eri kehikkorakenteita on helpompi rakentaa tilaa esim. hengitysletkuille, ilma-aukoille, tyrälle sekä muille pukemista tai käyttöä helpottaville ratkaisuille.

Kehikon ulkopuoli voidaan tilata eri kuvioilla - samat kuviot mitä on saatavana skolioosikorsettiin. Sisäpuolella oleva polyeteenistä valmistettu muoviosa on saatavana ainoastaan valkoisena. Tilauskaavakkeessa määritellään minkälainen Soft Body Jacket halutaan tilata. Päivitetty tilauskaavake on ladattavissa nettisivuiltamme [www.camp.fi](http://www.camp.fi).



# BOSTON LITE™



**”Proven Orthosis for supportive treatment.”**

”The major advantage of this orthosis was a marked improvement in sitting stability in 80% of patients.”

*Letts et al: St. Amant Rehabilitation Centre & Winnipeg Children's Hospital, University of Manitoba, Canada*



Tuotenro.	Malli	Tuotekuvaus	Malli	Lordoosikulma
29707	Boston Soft, orginaali	Standardimoduuli	Avokanavat	15°
29708	Boston Soft, orginaali	Mittatilaus	Avokanavat	Valittavissa
29709	Boston Soft, orginaali	Standardimoduuli	Umpikanavat	15°
29710	Boston Soft, orginaali	Mittatilaus	Umpikanavat	Valittavissa
29719	Lisänauhat soljilla	Malleihin 29707-29710	5 x 30,5 cm	
29725	Boston LITE (sis. I pehmusteen)	Moduuli, ei viimeistely	J1 - Y4A	15°
29726	Boston LITE (sis. I pehmusteen)	Moduuli, ei viimeistely	Mittatilaus	15°
29728	Boston LITE (sis. I pehmusteen)	Viimeistely	Mittatilaus	15°
29729	Boston LITE (sis. I pehmusteen)	Viimeistely	J1 - Y4A	15°
29730	Lisäpehmuste Boston LITE:n		I - 6*	
29731	Lisänauhat Boston LITE:n	Setti jossa 3 nauhaa/solkea	Yksi koko	

\*Koot Boston LITE pehmusteeseen kattavat 2 kokoa moduulista (J1/J2 = koko 1, J3/J4= koko 2)

Indikaatiot:

Neuromuskulaariset skolioosit, ryhdin kontrollointi ja post-operatiivinen tuki.