

**CAMP<sup>®</sup>**

# Traumatologian Tuotekuvasto

[www.camp.fi](http://www.camp.fi)



**Support for Better Life!**

Hyvät kollegat,

Meillä on ilo esitellä valikoima tuotteita, jotka soveltuvat traumahoitoihin. Tuotteet sopivat hyvin terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät leikkaussalissa, päivystysosastolla tai ortopedisellä osastolla.

Camp Scandinavia tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ammattilaisten tarpeisiin. Meillä on ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 13485 -sertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että meillä on selkeät tavoitteet valmistukselle, tuotannolle ja ympäristölle. Pääosa tuotevalikoimastamme on kehittänyt oma tuotekehittäjätiimimme, ja tuotteet valmistetaan omissa tuotantolaitoksissamme. Tämä tarkoittaa, että tuotteet ovat koko ajan hallinnassamme ja parannuspäätökset pystytään tekemään nopeasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja pyrimme aina parantamaan sekä kehittämään toimintaamme.

Jokaisella tuotesarjalla on oma tarinansa, mutta kaikilla on sama tarkoitus. "Support for Better Life" ei ole vain iskulauseemme. Se on asia, joka vaikuttaa kaikkiin tuotteisiimme, yrityksen toimintatapoihin ja rooliimme tuoteasiantuntijoina.

Toivomme, että tämä katalogi antaa sinulle kattavan yleiskuvan tuotteistamme, jotka soveltuvat hyvin erityyppiseen traumahoitoon. Tutustu koko tuotevalikoimaamme verkkosivuillamme [www.camp.fi](http://www.camp.fi). Jos sinulle herää kysymyksiä- otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai tuoteasiantuntijoihimme.

Nähdään!

**Asiakaspalvelu; 09 350 76 30, [info@camp.fi](mailto:info@camp.fi).**



**Anne-Mari Ilkka**  
AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ /  
FYSIOTERAPEUTTI  
0400-100 460  
[anne-mari.ilkka@camp.fi](mailto:anne-mari.ilkka@camp.fi)  
Vastuualueet: ortoosit, ortoosi- ja  
proteesikomponentit, materiaalit,  
rintaproteesit ja jalkineet



**Päivi Yliranta**  
AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ /  
FYSIOTERAPEUTTI  
0400-684 638  
[paivi.yliranta@camp.fi](mailto:paivi.yliranta@camp.fi)  
Vastuualueet: ortoosit, materiaalit,  
ortoosi- ja proteesikomponentit,  
jalkineet.



**Jani Pulkkinen**  
ASIAKASPALVELU  
09 350 76 317  
[jani.pulkkinen@camp.fi](mailto:jani.pulkkinen@camp.fi)



**Edina Putsela**  
ASIAKASPALVELU  
09 350 76 309  
[edina.putsela@camp.fi](mailto:edina.putsela@camp.fi)



**Piia Parikka**  
LIIKETOIMINTAJOHTAJA  
0400 138 756  
[piia.parikka@camp.fi](mailto:piia.parikka@camp.fi)

# SISÄLTÖ

<b>Tuotekategoriat</b>	<b>Sivut</b>
Muovit ja materiaalit	4 - 14
Käsi- ja rannetuet	15 - 16
Käsivarsi - ja hartiaortoosit	17 - 21
Jalka - ja nilkkatuet	21 - 23
Lonkkaortoosit	24
Kaularangan tuet	25 - 27
Selkätuet	28
Post-OP	29

# MUOVIT JA MATERIAALIT

## X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® on ilmava ja kevyt materiaali, joka on suunniteltu täyttämään kipsilastojen, pyöreiden laastareiden ja ortoosien valmistukseen liittyvät vaatimukset. Materiaali on valmistettu 100-prosenttisesta puuvillakankaasta, joka on kyllästetty kestumuvihartsilla. Kaikki kestumuovin sisältämät reaktiiviset aineet kovettuvat valmistuksen aikana, joten niistä ei muodostu vaarallisia höyryjä kipsauksen aikana tai kun kipsi poistetaan sahalla tai saksilla. X-LITE® materiaalit eivät sisällä haitallisia aineita ja ne ovat vaarattomia työstää. Ne on turvallisia myös mukaan lukien raskaana oleville naisille, astmaatikoille ja allergikoille.

3D-LITE™ on materiaali, jolla on samat ominaisuudet kuin X-LITE®:llä, mutta sen pohjana on kolmiulotteinen polyesteri. 3D-LITE™ on ylivoimainen materiaali lastojen ja ortoosien valmistukseen. 3D-LITE™ -materiaalia on saatavana myös LSO- ja TLSO-korsettina valmiina moduuleina yksilöllisesti räätälöityjen korsettien valmistukseen.

## X-LITE® ominaisuudet ja edut

### ERINOMAINEN HENGITTÄVYYS

Materiaalin avoin rakenne takaa hyvän hengittävyys ja mukavuuden. Iho voi hengittää, ja haavan paranemiselle luodaan parempi ympäristö.

### SOPIVUUS

X-LITE®-tuotteet ovat erittäin kevyitä, mikä lisää potilaan mukavuutta ja kipsin sopivuutta.

### VOIDAAN KÄYTTÄÄ UUELLEEN JA SUUNNITELLA UUELLEEN

Säästä rahaa ja aikaa! Käytä uudelleen rullalle jääneet tai ylijääneet osat. Tee pieniä muutoksia valmiiseen kipsiin tai lastaan sen sijaan, että tekisit kokonaan uuden kipsin, joka maksaa enemmän rahaa, lisää aikaa ja aiheuttaa potilaalle epämukavuutta.

### LUJUUDEN SÄÄTELY

Lisää lisää kipsikerroksia vakauden lisäämiseksi. Lisää rappauskaistaleita, kun vain tietyt alueet tarvitsevat vahvistusta.

### ERINOMAINEN MUOVATTAVUUS

Muotoutuu täydellisesti kehon anatomian mukaan - ei vaadi venyttämistä tai vetämistä.

### ITSEKIINNITTYVÄ

Itsekiinnittyvä lämmitettynä. Tarranauhat ja pehmusteet kiinnittyvät helposti ja tiukasti X-LITE®:een.

### NOPEASTI KOVETTUVA

Vain 30 minuutin kuluttua materiaali on kovettunut ja käyttövalmis.

### RÖNTGENSÄTEILYÄ LÄPÄISEVÄ

Kaikki X-LITE® -materiaalit ovat täysin röntgensäteitä läpäiseviä kolmeen rappauserrokseen asti.


### STABIILI

X-LITE® on erittäin vakaa materiaali. Se vaatii vähemmän materiaalikerroksia vastaavaan vakauteen verrattuna muihin markkinoilla oleviin kipsimateriaaleihin.



## X-LITE®-tuotevalikoima


X-LITE® on saatavana kolmessa eri vaihtoehdossa. Classic, Premium ja Plus. Sopivin materiaali valitaan indikaation ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

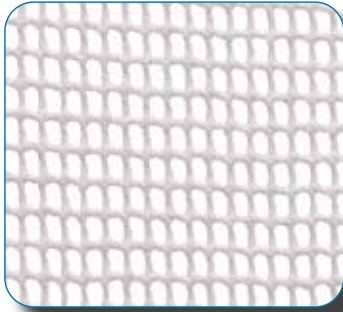

### CLASSIC

on alkuperäinen materiaali. Verkon suuremmat aukot takaavat hyvän hengittävyys. Koska se on vahvin X-LITE®-materiaali, sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin rappauksiin ja kiskoihin.

- Alkuperäinen
- Rakenteessa on harvimmat reiät
- Eniten hengittävyttä
- Suurin lujuus suurella kuormituksella
- Valkoinen, sininen ja harmaa.

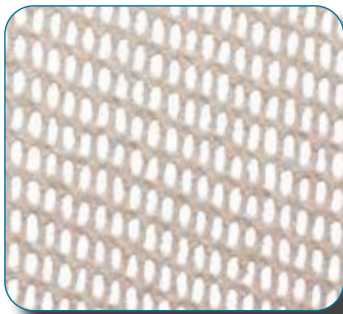

### PREMIUM

on valmistettu samasta materiaalista kuin CLASSIC, mutta ohuemmasta laadusta ja tiheämmällä rei'illä. Tämän ansiosta PREMIUM on joustavampi ja soveltuu käyttötarkoitukseltaan yläraajoihin ja lapsille.

- Ohuempi ja hienompi rakenne
- Pienempiin ortooseihin, yläraajoihin ja lapsille
- Suuri venyvyys ja muovattavuus
- Pehmeät reunat
- Beige ja valkoinen



### PLUS

on uusien markkinoille tuotu X-LITE®-tuote. Materiaalia on saatavana viidessä eri värissä, ja siinä on pehmeä polyesteripinta.

- Pehmeä tekstiili yläpuoli
- Pehmeät reunat ja pehmeä pinta
- Vahvuus samanlainen kuin Classic
- Viisi eri väriä, valkoinen, musta, sininen, punainen ja vaaleanpunainen.
- Saatavana myös yhteensopiva nauha-annostelija.

## Ohjeet

- X-LITE® on lämmitettävä vesihautteessa noin 68-70 asteessa. Sitä voidaan lämmittää myös kullhossa kuumaassa vedessä.
- X-LITE®-levyjä kuumennetaan vedessä noin 1 minuutti ja rullataan noin 3 minuuttia. Muista liottaa rullat vedellä. Varmista, että materiaali on hyvin lämmitetty, ennen kuin alat käsitellä sitä. - Poista materiaali vesihautteesta pihdeillä, jotta vältät suoran kosketuksen veden kanssa. Anna ylimääräisen veden valua pois materiaalista ennen levittämistä. Itse materiaali ei kuumene.
- Suojaa haavat ja arvet asianmukaisilla sidoksilla. Jos kyseessä on murtumakipsi, käytä sukkanauhaa ja vaahtomuovipehmustetta suojaamaan ihoa kipsimateriaalin alla.
- Pistelämpöalueet lisävarusteiden, kuten teippien ja tarranauhojen, pysyvää kiinnittämistä varten.
- Materiaali voidaan muotoilla uudelleen niin monta kertaa kuin on tarpeen samalle potilaalle. Käytä ylijääneet palat ja rullat uudelleen.
- Pieniä korjauksia voidaan tehdä lämmittämällä valmista kipsiä hiustenkuivaajalla. Vältä ylikuumentamista.
- Käytä jäähdytyspussia tai jäähdytysuihketta ortoosin jäähdyttämiseksi nopeammin.



## X-LITE® Classic rulla

X-LITE® Classic on mitä vahvin materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic rullassa on kerroksien välissä suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

Valitse kolmesta väristä – valkoinen, antrasiitti tai sininen

**Käyttöalueet:** Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64103	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20 rullaa
64133	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20 rullaa
64136	Antrasiitti	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64137	Royal Blue	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64143	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10 rullaa
64146	Antrasiitti	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64147	Royal Blue	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64153	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10 rullaa
64163	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10 rullaa



## X-LITE® Classic arkki ja annostelija

X-LITE® Classic on mitä vahvin materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic on saatavilla arkkina tai kätevässä 10 metrin annostelijassa, josta voi leikata tarvittavan kokoisen palan muovia kerrallaan. Näin säästyy myös varastotilaa. Valittavana on kolme väriä: valkoinen, antrasiitti, Royal Blue -sininen.

**Käyttöalueet:** Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64250	Valkoinen	75 mm	10 m	1	Annostelija
64251	Valkoinen	100 mm	10 m	1	Annostelija
64252	Valkoinen	150 mm	10 m	1	Annostelija
64253	Valkoinen	200 mm	10 m	1	Annostelija
64254	Valkoinen	125 mm	10 m	1	Annostelija
64255	Antrasiitti	150 mm	10 m	1	Annostelija
64256	Royal Blue	150 mm	10 m	1	Annostelija
64290	Valkoinen	200 mm	375 mm	15	Arkki
64292	Valkoinen	200 mm	900 mm	15	Arkki
64293	Valkoinen	75 mm	375 mm	15	Arkki
64294	Valkoinen	100 mm	375 mm	15	Arkki
64295	Valkoinen	125 mm	375 mm	15	Arkki
64296	Valkoinen	150 mm	375 mm	15	Arkki
64297	Valkoinen	150 mm	900 mm	15	Arkki
64299	Valkoinen	500 mm	500 mm	10	Arkki
64302	Antrasiitti	200 mm	375 mm	8	Arkki
64304	Royal Blue	200 mm	375 mm	8	Arkki
64307	Valkoinen	300 mm	900 mm	10	Arkki



## X-LITE® PLUS rulla

X-LITE® PLUS rullien ulkopinta on pehmeä ja miellyttävä potilaalle. X-LITE® Plus on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® PLUS rullissa ei ole suojakalvoa kerrosten välissä, joten materiaali saadaan nopeasti ja helposti rullattua kipsattavalle alueelle.

Valittavana on 5 väriä: valkoinen, punainen, sininen, musta ja hot pink.

**Käyttöalueet:** Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenumero	Väri	Leveys	Pituus	Pkt/rulla
64701	Valkoinen	25 mm	1,8 m	5
64702	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20
64703	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20
64704	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10
64706	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10
64707	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10
64711	Punainen	25 mm	1,8 m	5
64712	Punainen	50 mm	1,8 m	20
64713	Punainen	75 mm	1,8 m	20
64714	Punainen	100 mm	1,8 m	10
64716	Punainen	125 mm	1,8 m	10
64717	Punainen	150 mm	1,8 m	10
64721	Sininen	25 mm	1,8 m	5
64722	Sininen	50 mm	1,8 m	20
64723	Sininen	75 mm	1,8 m	20
64724	Sininen	100 mm	1,8 m	10
64726	Sininen	125 mm	1,8 m	10
64727	Sininen	150 mm	1,8 m	10
64731	Musta	25 mm	1,8 m	5
64732	Musta	50 mm	1,8 m	20
64733	Musta	75 mm	1,8 m	20
64734	Musta	100 mm	1,8 m	10
64736	Musta	125 mm	1,8 m	10
64737	Musta	150 mm	1,8 m	10
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10





## X-LITE® PLUS arkki ja annostelija

X-LITE® PLUS:n ulkopinnassa on pehmeää kangasta, joka lisää potilasmukavuutta ja mahdollistaa värillisen kipsin teon. X-LITE® PLUS on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat X-LITE® materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® PLUS on saatavana arkkina tai käytännöllisessä 10 metrin annostelijassa, josta voidaan leikata halutun kokoinen pala.

Valitse viidestä väristä; valkoinen, punainen, sininen, musta ja hot pink.

**Käyttöalueet:** Kaikki lastat ja ortoosit.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkausko
64790	Punainen	150 mm	10 m	1 Annostelija
64791	Sininen	150 mm	10 m	1 Annostelija
64792	Musta	150 mm	10 m	1 Annostelija
64793	Hot Pink	150 mm	10 m	1 Annostelija
64753	Sininen	200 mm	375 mm	8 arkkia
64754	Musta	200 mm	375 mm	8 arkkia



## X-LITE® Premium rulla

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE® tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Premium rullissa on suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

**Käyttöalueet:** Rullattaviin kipsauksiin. Lisävahvuutta ortoosiin saadaan laittamalla useampi kerros materiaalia päällekkäin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64205	Valkoinen	50 mm	1,8 m	5 rullaa
64207	Valkoinen	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64209	Valkoinen	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64210	Valkoinen	125 mm	1,8 m	5 rullaa
64211	Valkoinen	150 mm	1,8 m	5 rullaa





## X-LITE® Premium arkki ja annostelija

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE® tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. Tuote on saatavissa arkkinä tai käytännöllisessä 10 metrin annostelijapakkauksessa, josta se voidaan leikata toivottuun mittaan.

**Käyttöalueet:** Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat. Kun ortoosista halutaan stabiilimpi, voidaan useampi kerros laittaa päällekkäin.

Tuoteno.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Arkki
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Arkki
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Annostelija
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Annostelija
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Annostelija



## Stockinette dispenser

Stockinette dispenser on valmistettu pyörökatusta polyesterista. Materiaali on pehmeää ja joustavaa. Stockinette on ribbineulosta, minkä ansiosta se istuu hyvin päällä ilman ihoa hankaavia rypyjä. Rulla toimitetaan kätevässä annostelijalaatikossa.

Tuoteno.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64394	Valkoinen	30 mm	25 m	1 annostelija
64395	Valkoinen	50 mm	25 m	1 annostelija
64396	Valkoinen	70 mm	25 m	1 annostelija
64397	Valkoinen	100 mm	25 m	1 annostelija
64398	Valkoinen	150 mm	25 m	1 annostelija



## X-LITE® Stockinette

Saumaton ortoosi- ja kipsisukka 100 % valkaisuamatonta polypropyleeniä. Mukava ja pehmeä materiaali kuljettaa hyvin kosteuden iholta. Stockinette on joustinneuletta ja istuu näin hyvin jalkaan tekemättä vekkejä ihoa vasten.

Tuoteno.	Väri	Materiaali	Leveys	Pituus	Pakkaus
64400	Beige	Puuvilla	21 mm	23 m	1 rulla
64401	Valkoinen	Polypropeeni	30 mm	10 m	1 rulla
64411	Valkoinen	Polypropeeni	50 mm	10 m	1 rulla
64421	Valkoinen	Polypropeeni	70 mm	10 m	1 rulla
64431	Valkoinen	Polypropeeni	100 mm	10 m	1 rulla
64441	Valkoinen	Polypropeeni	150 mm	10 m	1 rulla
64442	Valkoinen	Polypropeeni	200 mm	10 m	1 rulla




## Vaahtoside

Vaahtoside on vaahtokumipehmuste, joka hengittää ja hylkii vettä. Pehmuste vaimentaa hyvin iskuja, eikä se ruttaannu yhtä helposti kuten tavalliset kipsipehmusteet.

**Käyttöalueet:** X-Litesta valmistetun kipsin pehmusteena.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64480	Valkoinen	75 mm	2,75 m	20 rullaa
64485	Valkoinen	100 mm	2,75 m	16 rullaa
64490	Valkoinen	125 mm	2,75 m	10 rullaa



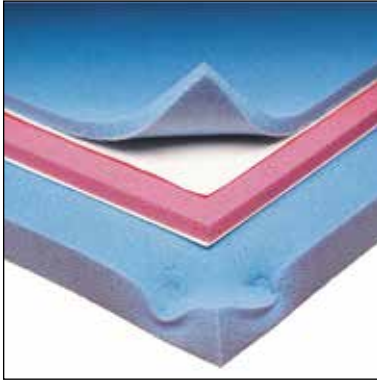

## T-Stick

Painetta keventävä ja hengittävä polyuretaanimateriaali, joka muotoutuu kehon mukaan ja palautuu muistinsa ansiosta alkuperäiseen muotoonsa. Materiaalia käytetään painekohtien keventämiseen ja pehmusteena ortoosissa ja proteeseissa. Tuotteissa 51100 ja 51102 on itsekiinnittyvä takapinta. Saatavana kahta kovuutta.

Tuotenro.	Väri	Jäykkysaste	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51100	Sininen	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 arkkia
51101	Sininen	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 arkki
51102	Roosa	Pehmeä	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 arkkia



## Manosplint® Vaahtomuovipehmuste

Vaahtomuovipehmuste, jossa on kevyt painetta keventävä vaikutus. Käytetään ortoosien pehmusteena. Pehmusteessa on suljetut solut ja se on helppo puhdistaa. Materiaali on itsekiinnittyvä ja venyvä, joka mahdollistaa sen helppokäyttöisyyden. Voidaan kiinnittää suoraan ortoosiin tai käyttää luun ulkonemien paineenalennuksena kipsin alla. Liimapohjaa ei saa laittaa suoraan iholle, joten materiaali kiinnitetään kipsin alle sukkaan. Saatavana beigen ja mustan värisenä.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
51128	Musta	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia
51129	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia



## Color elastinen sidos

Täydennyksenä X-lite kipsilastoihin tarjoamme korkealaatuisia ja kauniin värisiä elastisia sidoksia. Sidoksen mukavuus ja korkealaatuisuus antavat näin erinomaisen tuen potilaille myös pidempiaikaisessa kipsin käytössä. Color elastinen sidos hengittää ja antaa yhdessä X-Lite kipsin kanssa ilmavan tuen. Color elastinen sidos ja sen pehmeä ulkopinta ja kudotut reunat tuntuvat mukavalta ihoa vasten. Sidos muotoutuu hyvin elastisuutensa vuoksi ja sitä voidaan käyttää niin pienemmissä kuin suuremmissa käyttötarkoituksissa. Elastinen sidos voidaan pestä 60°C asteessa ja sterilisoida.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64106	Color elastinen sidos	Musta	6 cm	5 m	10
64107	Color elastinen sidos	Punainen	6 cm	5 m	10
64108	Color elastinen sidos	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109	Color elastinen sidos	Vihreä	6 cm	5 m	10
64110	Color elastinen sidos	Keltainen	6 cm	5 m	10
64112	Color elastinen sidos	Musta	10 cm	5 m	10
64113	Color elastinen sidos	Royal Blue	10 cm	5 m	10



## X-LITE® levy silikonipinnoitteella

Käytetään työskentelyalustana X-LITE'illa kipsatessa. Silikonipinta ehkäisee X-Liten tarttumisen alustaan. Levyn perforoitu pinta edesauttaa, että X-LITE® rullista lähtevä vesi vuotaa levyn alle imeytyen sen alla olevaan pyyhkeeseen.

Tuotenro.	Leveys	Pituus
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



## VWR Kuumavesiallas

Kuumavesiallas, jossa on kaksiseinäinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu (sisäpuoli) ja pinnoitetusta teräslevystä valmistettu (ulkopuoli) säiliö. Vesialtaan mukana tulee läpinäkyvä muovinen päällyskansi ja yleisalusta, joka suojaa altaan pohjassa olevia vesiputkia. Alusta voidaan helposti irroittaa ja puhdistaa. Vesialtaassa on digitaalinen lämpötilan-asetus ja tyhjennyshana kätevää tyhjennystä varten.

- Nopea Lämmitys (noin 30 minuuttia kylmällä hanavedellä).
- Digitaalinen lämpötilanosoitin kolmella esiasetetulla lämpötilavaihtoehdolla.
- Lämpötila-alue +5-99 °C ja lämpötilan vakaus ±0.2 °C.
- Matalan vedenpinnan hälytys, joka sammuttaa vesialtaan automaattisesti.

Tuotenro.	Malli	Leveys	Pituus	Korkeus
64515	26 L	Ulkomitta: 33,5 cm - Allas: 27,8 cm	Ulkomitta: 59 cm - Allas: 48,1 cm	Ulkomitta: 43 cm - Allas: 17,5 cm





## Ergo Supercut Cast -kipsisakset

Ensiluokkaiset kipsisakset on valmistettu japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä, joka on erittäin kestävä. Sisältää volframikarbidilla vahvistetut terät. Alemmassa terässä on hieno hammastus ja teräväkulmainen ylempi terä. Mallissa on innovatiivinen ergonomisesti muotoiltu ylärengas. Tämä muotoilu keventää peukaloon kohdistuvaa painetta jotta saksien päivittäin käyttö olisi helpompaa. Alarenkaaseen mahtuu kaksi sormea, joka keventävät painetta ja parantavat käyttömukavuutta. Sakset voidaan pestä autoklaavissa.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51219	Ruostumaton teräs ja volframikarbidilla vahvistetut terät.	18 cm



## Kipsisakset muovisilla sormiosilla

Käytännölliset, erilaisten muovimateriaalien leikkaamiseen tarkoitetut sakset. Sakset ovat ruostumatonta terästä AISI 420 ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.

Tuotenro.	Väri	Materiaali	Pituus
51211	Musta	AISI 420	18 cm
51212	Vihreä	AISI 420	18 cm
51213	Keltainen	AISI 420	18 cm



## Supersakset

Erittäin terävät sakset, joissa on suuri kädensija. Sopivat hyvin muovin leikkaamiseen myös silloin, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51217	AISI 420	20 cm



## Taivutetut MAYO-sakset

Taivutetut sakset, joissa on pieni kädensija. Sopivat ortoosin reunojen viimeistelyyn, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan pestä autoklaavissa. Sakset sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51214	AISI 420	14 cm



## Smith-sakset

Erittäin terävät sakset, joissa on suuri kädensija. Helppo käsitellä ja leikata pehmeää muovimateriaalia. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan pestä autoklaavissa.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
51216	AISI 420	18 cm



## Kipsisakset, ruostumaton teräs

Laadukkaat saksat, jotka leikkaavat kaikenlaista materiaalia. Alemmassa teräosassa on sahalaita ja ylemmässä suora viistoterä. Saksat ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51208	Kipsisakset, ruostumaton teräs	14 cm
51207	Kipsisakset, ruostumaton teräs	18 cm
51218	Kipsisakset ruostumatonta terästä vasenkätiset <b>UUTUUS!</b>	18 cm



## Kipsisaksi sahalaita

Korkealaatuiset saksat, jotka leikkaavat sekä kylmää, että kuumaa lastamateriaalia ja kipsausmateriaalia. Ihanteellinen hienosäätöön ja kulmien muotoiluun. Alemmassa teräosassa on sahalaita. Saksat ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51209	Sahalaitaiset kipsisakset	12 cm

# KÄSI- JA RANNETUET



## SELECTION® Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kaksi sormeä tai useampia sormia yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormi tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta. Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivuvasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti. Puolivalmisteinen Fingerloop-levy, joka on 10 cm leveä, voidaan helposti leikata saksilla halutun levyiseksi yksittäisiksi nauhoiksi.

**Käyttöalueet:** loukkaantumisen, leikkauksen tai vakaan murtuman jälkeen, metakarpaaliluun murtumat, krooniset kiputilat, nyrjähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuuran hoidossa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Pakkauskoko
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1



**Mitta:** Ranteen ympärys



## Vission sormilasta

Sormilasta sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen sorminivelten ruptuurien ehkäisemiseksi. Lastaa voidaan myös käyttää konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

**Käyttöalueet:** Sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen, konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

**Muuta:** Ortoosin pituus volaaripuolella on 27 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
46020	Vission Sormilasta	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Large	> 19 cm	Bilat.



**Mitta:** Ranteen ympäryys

## Wrist Lacer™ II lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat ja irrotettavat alumiinilastat dorsaali- ja volaaripuolella. Tuen sisäpuolella distaalin nyöriytyksen kohdalla oleva pehmuste suojaa peukalon tyveä. Tuki on valmistettu kulutusta kestävästä mokkamateriaalista, jonka vuoraus on ilmava. Ainutlaatuinen kiinnityssysteemi tukee rannetta tasaisesti kaikkien neljän nauhan avulla. Kompressiota voidaan helposti säätää sopivaksi henkilöille, joiden kynärvarsi ja ranne ovat epätavallisessa asennossa. Nyöriytyks on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää.

**Käyttöalueet:** Karpaalikanavasyndrooma, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti.

**Muuta:** Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta [www.youtube.com](http://www.youtube.com) hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Pediatric	<12 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik



**Mitta:** Ranteen ympäryys

## Wrist Lacer™ II, pitkä malli

Erittäin stabiili pitkä rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari-että dorsaalipuolella. Lastat voidaan ottaa pois ja muotoilla sopiviksi. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Valmistettu kestävästä mokkakajjitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Nyöriytyks helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Säädettävä peukalonauha.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tuote on saatavana beigenä tuotenumera 28572. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta [www.youtube.com](http://www.youtube.com) hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 26 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



# KÄSIVARSI- JA HARTIAORTOOSIT



## Kyynärpääortoosi Ulnaris

Yleisortoosi, joka rajoittaa kyynärpään flexiota ja extensiota, samalla lievittäen kubitaalikanavanoireyhtymään liittyvää kipua.

Ortoosi on pehmeä ja sisältä pehmustettu, ja siinä on helposti säädettävä alumiininen tuki. Tuote on valmistettu erittäin kevyestä, hengittävästä materiaalista. Pukemisen helpottamiseksi ortoosin sisällä on tasku, jonka läpi käsi työnnetään ortoosia päälle laitettaessa.

**Käyttöalueet:** Kubitaalikanavanoireyhtymä tai muu kyynärpään sairaus, jossa kyynärpään rajoittaminen/tukeminen on tarpeen.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
42219	Musta	Yksi koko	Bilat.



## Kantoside Olkalukko

Monikäyttöinen kantoside, jota on helppo käyttää. Tuotteeseen kuuluu vartalon ympäri kulkeva vyötärönauha, johon olkavarsi kiinnitetään ja saadaan näin aikaan olkanivelen tehokas immobilisaatio. Ranneosa kiinnittyy vyötärönauhan etuosaan ja tämä puolestaan pikalukolla olkaremmiin. Myös peukalolle on oma tukensa, jotta käsi saadaan pysymään oikeassa kulmassa välttämällä samalla myös ”riippukättä”. Säädettävä olkaremmi takaa potilaalle hyvän istuuden. Tuote sopii käytettäväksi sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Iso pehmustetyyny keventää olkanivelen ja solisluun kuormitusta tehokkaasti. Tämä kantoside on helppo säätää ja miellyttävä sekä yksinkertainen käyttää. Vyötärönauhan pituus on 120 cm.

**Käyttöalueet:** Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kuormituksen keventäminen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
42213	Kantoside Olkalukko	Svart	One Size



## Kantoside abduktiotyynyllä

Universaali kantoside, joka immobilisoi tehokkaasti olkapään ja jossa on lisäksi 15 asteen abduktiotyyny, joka kiinnitetään helposti kantositeeseen käsivarren sisäpuolelle. Abduktiotyyny on muotoiltu lepäämään mukavasti kehoa vasten.

**Käyttöalueet:** Postoperatiivinen käyttö olkanivelen artroskooppisten leikkausten jälkeen, Rotatorcuff-leikkaus, Olkanivelen kapselileikkaus, Olkanivelen jänteiden/ lihasten kiinnitysten kirurgiset korjaukset, Sijoiltaan menneen olkanivelen korjausleikkauksen jälkeen, Kuormituksen kevennys leikkauksen tai trauman jälkeen

Tuotenro.	Väri	Koko
42218	Sininen	One Size



## Rulla-mitella

Yksinkertainen vaihtoehto kantositeelle (Collar'n Cuff), mitella, toimitetaan 12m rullassa. Pakkauksessa toimitetaan kaksi rullaa, (joista toinen annostelulaatikossa) sekä 10 kpl Y-tarrakiinnikettä kyynärvarren asennon tukemiseksi. Materiaali on pehmeää ja joustavaa sekä säilyttää muotonsa myös kuormituksessa.

Tummansinisen värinsä ansiosta tuki säilyy siistinä pitkään.

**Användningsområden:** Suositellaan käytettäväksi ranteen, kyynärnivelen ja hartian vammojen hoidossa. Voidaan käyttää myös kipsin kanssa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
42212	Rulla-mitella	Musta	5 cm	2 x 12 metriä	Rullaa



## Puuvilla-kantoside

Helppokäyttöinen kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

**Käyttöalueet:** Käytetään vähentämään räsitusta olkapäässä ja käsivarressa.

Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47101	Harmaa	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Harmaa	X-Large	31-34 cm	Bilat.



**Mitta:** Kyynärpästä MCP-niveliin



## Kantoside, vaahtomuovi

Kantoside, jossa on fiksaationauha mukana. Sisäpuoli on froteeta. Säädettävä hartianauha, joka voidaan kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

**Käyttöalueet:** Käytetään vähentämään räsitusta olkapäässä ja käsivarressa.

Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
20031	Harmaa	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Harmaa	X-Large	48-56 cm	Bilat.



**Mitta:** Kyynärpästä MCP:hen.





**Mitta:** Kynärpästä ranteeseen



**Mitta:** Mitta 1: rinnan ympärys

**Mitta 2:** olkavarren pituus



**Mitta 1:** Kantositeen korkeus ja leveys

**Mitta 2:** Kiinnitysnauhan korkeus ja pituus

## Verkkokangas-katoside

Ilmava katoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla katosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

**Käyttöalueet:** Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa.

Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47100	Harmaa	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Harmaa	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.

## Vission katoside IMMO

Vission katoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen puolisuuden voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla puolella.

**Käyttöalueet:** Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasrudun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian seudun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

**Kontraindikaatiot:** Ei tunnettuja

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm

## WRAP-katoside

Perinteinen kaksiosainen katoside, jonka molempia osia voidaan säätää erikseen. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Käsiosassa on muovisolki selkäpuolella, joka pitää molemmat osat kiinni toisissaan ja estää niitä liukumasta hartioiden ylitse. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

**Käyttöalueet:** Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa.

Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
47102	Harmaa	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Harmaa	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.





**Mitta:** Käsivarren yläosan ympärys proksimaalisesti.

## Humerux Humerusortoosi

Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompressioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmittää ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi. Useimmiten muotoilu ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia.

**Käyttöalueet:** Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Tuoteno.	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta
62105	Musta	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Musta	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Musta	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Musta	X-Large	34 cm	42 - 50 cm

## JALKA- JA NILKKATUET



### Walker Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylytynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Helppo sovittaa. Säädettävissä kiilapohjallisilla.

**Käyttöalueet:** Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuoteno.	Malli	Koko	Pituus	Kengän koko
47605	WALKER FIXED, KORKEAVARTINEN	Small	35 cm	34-38
47605	WALKER FIXED, KORKEAVARTINEN	Medium	42 cm	39-42
47605	WALKER FIXED, KORKEAVARTINEN	Large	42 cm	43-45
47613	Lisäpehmuste	Small	-	-
47613	Lisäpehmuste	Medium	-	-
47613	Lisäpehmuste	Large	-	-



## Walker Protect Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, hengittävä ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Mukana tulee kaksi ylimääräistä kondylipehmustetta, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Nilkkakulma säädettävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

**Käyttöalueet:** Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47608	Protect Fixed korkea	Small	25 cm
47608	Protect fixed korkea	Medium	29 cm
47608	Protect fixed korkea	Large	32 cm
47611	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47615	Lisäpehmuste	Small	
47615	Lisäpehmuste	Medium	
47615	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



## Walker Protect Fixed, matalavartinen

Immobilisoiva matalavartinen walker, joka on matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondylyityynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädettävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

**Käyttöalueet:** Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47609	Protect Fixed matala	Small	25 cm
47609	Protect Fixed matala	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed matala	Large	32 cm
47612	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47616	Lisäpehmuste	Small	
47616	Lisäpehmuste	Medium	
47616	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiilasetti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiilasetti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



## Walker ROM Pitkä

Ylemmän nilkkanivelen immobilisoiva ortoosi on valmistettu ruiskuvaletusta polypropeenista ja siinä on kevyt, kestävä ja vakaa muotoilu. ROM-säätö mahdollistaa asteittaisen mobilisaation 45°:n plantaariflexiosta 30°:n dorsaaliflexioon 7,5°:n välein. Liikerajoitusmahdollisuus 0°, 10° ja 20° plantaariflexioon. Metalliset sivukiskot säällä. Integroidun ilmantäyttöjärjestelmän avulla voit asteittain lisätä/vähentää immobilisaatiota tarpeidesi mukaan.

Sisäpehmusteen tekstiili on vuorattu pehmeällä, hengittävällä ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja takaa optimaalisen mukavuuden. Lateksiton. Liukumaton keinupohja mahdollistaa täyden rullauksen. Säädettävät tarranauhat takaavat täydellisen immobilisaation. Yksinkertainen ja helppo pukea. Mahdollista lisätä kantakiila.

**Käyttöalueet:** Akuutti nilkan nyrjähdys. Pohkeen pehmytkudosvauriot. Sääriluun ja pohjeluun distaaliset rasitusmurtumat. Jalan ja nilkan hyväasentoiset murtumat. Akillesjänteen leikkaus. Nilkan ja varpaan nivelten immobilisointi. Nilkkanivelen kuntoutus. Post-ORIF (open reduction and internal fixation) post-operatiivinen käyttö.

**Muuta:** Korkeus S 35 cm. Korkeus M ja L 42 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
47606	Walker ROM long	Small	Bilat.	34-38
47606	Walker ROM long	Medium	Bilat.	39-42
47606	Walker ROM long	Large	Bilat.	43-45
47610	Lisänauhasetti	Small	-	-
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large	-	-
47613	Lisäpehmuste	Small		
47613	Lisäpehmuste	Medium		
47613	Lisäpehmuste	Large		



## Walker AIR korkea

Immobilisoiva walker, muotoilultaan matalaprofiilinen, kestävä ja tukeva, on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Integroidulla ilmajärjestelmällä voit asteittain lisätä/vähentää immobilisointia tarpeen mukaan.

Ortoosissa on kaksi kiinteää metallitukea, jotka stabiloivat jalan ja nilkan. Pehmeä pehmuste on päällystetty ilmavalla ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Säädettävä Velcro-nauha takaa täydellisen immobilisoinnin. Lisäpehmuste, nauha-setti, varvassuoja ovat tilattavissa erikseen. Nilkkakulma säädettävissä kiiloilla. Helppo sovittaa.

**Käyttöalueet:** Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47607	Walker Air korkea	Small	23 cm
47607	Walker Air korkea	Medium	27 cm
47607	Walker Air korkea	Large	30 cm
47610	Lisänauhasetti	Small	
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large	
47614	Lisäpehmuste	Small	
47614	Lisäpehmuste	Medium	
47614	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiila setti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



# POLVITUET



## Ascender® post-op polviortoosi

Ascender® on teleskooppinen (44-70cm) postoperatiivinen polviortoosi, jonka ekstension liikeradan säätöväli on -10° (hyperekstensio) ja 70°:en välissä. Fleksion säätöväli voidaan asettaa -10° ja 120°:n välille. Asetus säädetään yksinkertaisesti vetämällä ja siirtämällä stopparia nivelessä. Nivel voidaan lukita viiteen eri asentoon: -10° (hyperekstensio), 0° (neutraali), 10°, 20° ja 30° (fleksio). Nivelen säädöt voidaan varmistaa "Anti-tamper lukituksella" stopparin päällä. Tämä poistetaan saksilla leikkaamalla.

Kiskot voidaan säätää yksilöllisesti toivottuun pituuteen. Pituuden säätämiseksi tulee avata hakanen, joka on jokaisessa kiskossa erikseen. Kiskossa on selkeät merkinnät, joilla varmistetaan sekä lateraalisen että mediaalisen kiskon sama pituus.

Pehmeässä ja taipuisassa pehmusteessa on sisäpuolella liukumisen estävää materiaalia. Nauha kiinnitetään lukitusklipsillä sen pysymiseksi paikallaan sovituksessa. Ortoosi suljetaan vahvoilla soljilla. Nauhan pituutta voidaan säätää poistamalla Y-kiinnitys ja leikkaamalla nauha toivottuun pituuteen. Pehmuste ja nauha voidaan pestä käsin haaleassa vedessä miedolla pesuaineella. Malli on bilateraalinen ja sopii sekä vasemmalle että oikealle. Yksi koko.

**Käyttöalueet:** Postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Vas/Oik
47540	Ascender post-op polviortoosi	Yksi koko	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Pehmuste- ja nauhasetti	Yksi koko		Bilat.
47542	Lisäpehmustesetti	Yksi koko		Bilat.
47543	Lisänauhasetti	Yksi koko		Bilat.



## Postoperatiivinen ROM polviortoosi

Yhdenkoon postoperatiivinen polviortoosi, jossa sopivaan kokoon leikattava pehmuste. Pehmuste ei lähde purkautumaan leikatessa. Ortoosissa on alumiinikiskot, jotka voidaan muotoilla yksilöllisesti. Miellyttävä ja ilmava ortoosi kiinnitetään ympäri kulkevien tarranauhojen avulla. Kotelon sisällä olevaa kaksiakselistä niveltä on helppo säätää nastoilla, jotka on häviämisen minimoimiseksi kiinnitetty kuminauhalla. Nivelen säätöjen jälkeen, nivelkotelon kansi lukitaan ruuvilla, jolloin liikerata saadaan pysymään valitussa asennossa. Nivelrajoitus voidaan asettaa haluttuun kulmaan fleksiossa (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) ja ekstensiossa (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Tuotteesta on saatavilla lyhyt ja pitkä malli.

**Käyttöalueet:** Polvinivelen liikkuvuuden (fleksio/ekstensio) rajoittaminen postoperatiivisesti / posttraumaattisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus
28308	Postoperatiivinen polviortoosi, lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	40 cm
28309	Postoperatiivinen polviortoosi, pitkä	Tummansininen	Yksi koko	60 cm
28311	Lisänauhat 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	-
28312	Lisänauhat 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	-
28313	Lisäpehmuste 28308 lyhyt	Tummansininen	Yksi koko	-
28314	Lisäpehmuste 28309 pitkä	Tummansininen	Yksi koko	-



# KAULARANGAN TUET



## Pacific kaularangantuki

Polyeteenistä valmistettu kaksiosainen kaularangantuki, jota voidaan säätää molemminpuolisilla tarranauhoilla. Jäykkä kuori myötäilee leuan muotoa ja nojaa kevyesti rintalastaa vasten. Tuki on matalampi sivuilta, jotta se ei hankaisi hartioita tai korvia. Tuen korkeutta säädetään kahden muoviruuvin avulla. Mukana tulee pehmeä, saumaton ja ilmava pehmuste, joka voidaan pestä tai vaihtaa.

**Käyttöalueet:** Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus
20625	Valkoinen/Musta	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Valkoinen/musta	Medium/Large	8-13 cm
20626	Lisäpehmuste, musta	Small/Medium	
20626	Lisäpehmuste, musta	Medium/Large	



## Trachea kaularangantuki

Plastazotesta valmistettu kaksiosainen, trachea-aukollinen kaularangantuki. Tuki on anatomisesti muotoiltu hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Niskaosa ja leuanalus ovat muovivahvistetut. Tuki kiinnitetään molemminpuolisilla tarranauhoilla.

**Käyttöalueet:** Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



## Eclipse® Kaulatuki

Eclipse kaulatuki on moderni kaulatuki, jonka istuvuus ja toimivuus on erittäin hyvä. Eclipse on helppo säätää ja siinä on puolijäykkä rakenne. Tuen ”quick-fit” toiminnot helpottavat sovitusta ja koon säätöä. Eclipse on tarkoitettu rajoittamaan fleksiota, ekstensiota ja rotaatiota potilaan toipumisen edistämiseksi. Avoin raamien rakenne tekee siitä ilmavan ja mukavan ja samalla trachea-aukon koko saadaan riittävän suureksi. Saatavana vain yksi koko, joka riittää lähes kaikille ympärysmittan ja korkeuden puolesta. Pehmeuste on vaihdettavissa ja voidaan ostaa erikseen. Korkeus voidaan asettaa 7,5 cm:n ja 18,75 cm:n välille.

**Käyttöalueet:** Stabiloi selkärankaa fleksion, ekstension ja rotaation ehkäisemiseksi kaularangan vammojen tai ongelmien yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
20628	Eclipse kaulatuki	Vaaleanharmaa	Yksi koko
20629	Lisäpehmuste	Harmaa	Yksi koko



## Kaularangantuki, muotoiltu

Pehmeäntuntuinen anatomisesti muotoiltu kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki mukailee leuan ja rintakehän muotoja ja tuntuu mukavalta. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

**Käyttöalueet:** Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47012	Harmaa	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Large	12 cm	32 – 48 cm



## Kaularangantuki, suora

Pehmeäntuntuinen kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki voidaan kiinnittää edestä tai takaa. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

**Käyttöalueet:** Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47010	Harmaa	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Harmaa	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Sininen	Large	12 cm	32 – 48 cm



## Vission kaularangantuki

Anatomisesti muotoiltu pehmeä kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Muotoiltu leuan ja rintakehän muotoihin sopivaksi. Päälyysosa on lycraa, joka tekee tuesta modernin näköisen samalla kun se on viileän ja mukavantuntuinen ihoa vasten. Materiaali ei sisällä lateksia.

**Käyttöalueet:** Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47014	Musta	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Musta	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Musta	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Musta	Large	12 cm	32-48 cm

# SELKÄTUET



## Hyperekstensiotuki C35+

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon. Rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisiikettä. Tuen korkeus on säädettävissä sekä leveys rinnan kohdalta. Rintalevy on asteittain liikkuva, minkä vuoksi kulmaa on helppo säätää. Alapanta voidaan säätää vapaasti liikkuvaksi tai lukita tiettyyn asentoon. Säädettävä selkälevy.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalinen ja torakolumbaalinen osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympäryys
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Lisä rintalevy	Yksi koko		
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpinnan vaihtopehmuste			



## Hyperekstensiotuki C37

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon, joka rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisiikettä. Tuen korkeutta ja leveyttä ja selkäosaa voidaan säätää sekä lantiolevyn asentoa muuttaa. Alemman pinnan kulmaa voidaan myös säätää.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalinen ja torakolumbaalinen osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympäryys
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Lisä rintalevy			
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpinnan lisäpehmuste			



# POST-OP



## Post op kenkä

Post op hoitokenkä, joka on pehmustettu. Kengän päällinen on kestävää nailonia ja siinä on solkikiinnitys. Päällinen on suunniteltu sopimaan jalan ollessa turvotustilassa. Kengän takaosa on vahvistettu, jotta jalka pysyisi paikallaan. Ulkopohja on jäykkä, suora ja pyöristämätön. Suunnittelu parantamaan vakautta ja helpottaa kuntoutusta jalkaleikkauksen tai traumahoiton jälkeen. Sitä voidaan käyttää myös yhdessä kipsin kanssa.

**Käyttöalueet:** Siteet tai turvotus, jalkaleikkaus, murtuneen varpaan hoito, metatarsaalivammat, pehmytkudostoimenpiteet, diabeettisen jalkaterän hoito ja leikkauksen jälkeinen toipuminen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Sisäpohjallisen pituus	Sisäpohjallisen leveys
432090011	Miesten	Small	Bilat.	26 cm	10 cm
432090012	Miesten	Medium	Bilat.	27,5	10 cm
432090013	Miesten	Large	Bilat.	30 cm	10 cm
432090014	Miesten	X-Large	Bilat.	31 cm	11 cm
432080011	Naisten	Small	Bilat.	23,5 cm	8 cm
432080012	Naisten	Medium	Bilat.	24,5 cm	9 cm
432080013	Naisten	Large	Bilat.	26 cm	9 cm
432070000	Lasten	One size	Bilat.	20 cm	8 cm





# Support for Better Life!



Tel  
E-post  
Web

SVERIGE  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

DANMARK  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

FINLAND  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

NORGE  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no