



Lonkkaortoosit

www.camp.fi



Lerman Haro-lonkkaortoosi

Lonkkaortoosi, jossa on monia eri säätömahdollisuuksia. Ortoosin transversaalitason kiertoa, fleksiota ja ekstensiota sekä abduktiota ja adduktiota voidaan säätää. Ortoosi on valmistettu muovista ja siinä on teräksinen/alumiininen nivel. Sopii sekä naisille että miehille.

Käyttöalueet: Käytetään postoperatiivisesti.


Muuta: Lisäpehmuste voidaan ostaa erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympäryys	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Small	70-80 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Medium	85-90 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	Large	100-110 cm	Vas/Oik
62790	Lerman Haro	X-Large	115-125 cm	Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Small		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Medium		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	Large		Vas/Oik
62791	Lisäpehmuste, lantio	X-Large		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Small		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Medium		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	Large/X-Large		Vas/Oik
62792	Lisäpehmuste, reisi	X-Large		Vas/Oik

Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD on tarkoitettu Multipel Skleros (MS) tautia sairastaville henkilöille, joilla alaraajojen toiminta on heikentynyt. HFAD on tarkoitettu avustamaan sitä raajaa, jolla puolella tukea käytetään, parantamaan kävelysuoritusta sekä edistämään päivittäistä aktiiviteettitasoa. Ortoosi koostuu yhdestä mukavantuntuisesta lantionauhasta ja kahdesta joustavasta kenkiin kiinnitettävästä remmistä. Tuki auttaa lonkan, polven ja nilkan koukistusta. Tuennan tasoa voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti. HFAD:ta voidaan käyttää tavallisten vaatteiden päällä tai löysien vaatteiden alla. HFAD voidaan tilata oikeaan tai vasempaan jalkaan tai kaksiosaisena.

Käyttöalueet: HFAD voi olla eduksi MS-potilaille, joilla on heikkoutta lonkan, polven tai nilkan koukistuksessa, rajoittunut rasituksen sieto ja mahdollisesti kävelyä aiheuttava uupumus sekä vaikeuksia jalan nostamisessa. Ortoosia voidaan käyttää myös silloin kun käytössä on peroneustuki riippunilkan tukemiseen ja kompensatioliikkeet, kuten korostunut lonkan nosto sekä alaraajan kiertäminen ja/tai painon siirtäminen toiselle jalalle. Myös silloin, jos lonkan ja polven koukistajat ovat heikot tai niissä on kohonnut tonus, ortoosi voi auttaa lihaksia rentotumaan ja siten avustaa parempaa kävelyä.

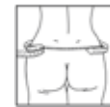

Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympäryys	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Small	61-82 cm	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Medium	83-102 cm	Vas/Oik
62784	Yksiosainen	Large	103-122 cm	Vas/Oik
62783	Kaksiosainen	Small	61-82 cm	Bilat.
62783	Kaksiosainen	Medium	83-102 cm	Bilat.
62783	Kaksiosainen	Large	103-122 cm	Bilat.

Rotaationauha kiertoliikkeen kontrolloimiseen

Lantiovyö, jossa on alaraajojen voimakasta kiertoa kiertoa korjaava ja ehkäisevä nauha. Se auttaa normalisoimaan kävelyn hitaalla venytyksellä nilkasta lantioon. Nauha seuraa säärtä kiinnitetään alhaalla jalkaterän ympärille.

Käyttöalueet: Neurologiset vammat ja alaraajojen heikkous.

Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Funktio
53305	B	Lapsi B	5,1 cm	Kiertoliike ulos päin vasen sääri/kiertoliike sisään päin oikea sääri
53305	A	Lapsi A	5,1 cm	Kiertoliike ulos päin oikea sääri/kiertoliike sisään päin vasen sääri
53305	D	Aikuinen D	7,6 cm	Kiertoliike ulos päin vasen sääri/kiertoliike sisään päin oikea sääri
53305	C	Aikuinen C	7,6 cm	Kiertoliike ulos päin oikea sääri/kiertoliike sisään päin vasen sääri




S.W.A.S.H.®


oikea asento istuttaessa,
seisottaessa ja käveltäessä.



Istuma-asennossa, eli lonkkanivelet fleksiassa, ortoosi avaa lonkkaniveliä abduktioon ja varmistaa näin hyvän istumatasapainon ja vartalon pystyasennon. Tämä mahdollistaa paremman ryhdin ja toiminnallisuuden istuessa, jolloin lapsi voi vapaasti käyttää käsiään.

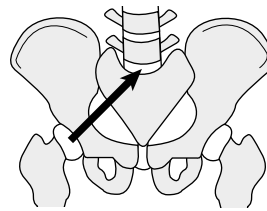

SWASH:in kanssa

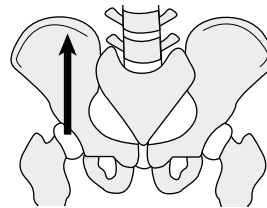

Ilman SWASH:ia

Tärkeimmät tavoitteet SWASH:in kehityksessä olivat:

1. Lisääntynyt lonkan abduktio: tavoitteena varovainen lähentäjälihasten venytys ja lonkkanivelen asennon parantuminen.
2. Estää lonkan adduktio istuttaessa, seisottaessa ja käveltäessä.
3. Parantaa ryhtiä istuttaessa ja käveltäessä.
4. Mahdollistaa siirtymisen pystyasennosta istuutumiseen saman ortoosin avulla.

Hoito SWASH-ortoosin avulla on tiimityötä. On tärkeää, että koko tiimi osallistuu ortoosin sovittamiseen sekä asettaa hoidolle kohtuullisia tavoitteita. SWASH-ortoosin ainutlaatuinen rakenne korjaa lonkan asentoa. Se abdusoi riittävästi, jotta seisottaessa ja käveltäessä voidaan ehkäistä alaraajojen saksaminen ja rajata femurin sisärotaatiota.

S.W.A.S.H.®

oikea asento istuttaessa,
seisottaessa ja käveltäessä.




Valitse abduktiokulma

SWASH-ortoosiin on mahdollista valita kaksi eri abduktiokulmaa - toisessa suurempi abduktio, joka antaa leveämmän istuma-asennon ja toisessa pienempi abduktio, joka antaa hieman kapeamman istuma-asennon.



Pienempi abduktio - kiskot 115°

- Jos lapsi käyttää kapeaa pyörätuolia
- Jos adduktorit ovat erittäin kireät

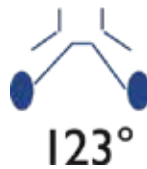

Suurempi abduktio - kiskot 123°

- Venyttää voimakkaammin lonkan lähentäjälihaksia istuttaessa.
- Parantaa pystyasentoa

Käyttöalueet:

- Spastinen hemiplegia
- Spastinen diplegia
- Spastinen quadriplegia
- Lonkkanivelen subluksaatiovaara
- Botox-hoidon yhteydessä
- Postoperatiivinen käyttö

Kontraindikaatiot

- Jos lonkka on mennyt sijoiltaan
- Suuremmat kuin 20° lonkan fleksiokontraktuurat
- Yölasta

Lisätietoa sovituksesta ja säädöistä löytyy SWASH Steady & Go Fitting Manualista.

Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme



Mitta: Tutustu SWASH Sovitus manuaaliin saadaksesi lisätietoja mitoista.

SWASH® STEADY Vyötäröosa

SWASH STEADY korvaa SWASH Classic ortoosin. Tuotetta on jatkokehitetty niin, että sen rakennetta ja ulkonäköä on parannettu. SWASHin tarkoitus on estää liiallinen lonkan adduktio istuessa, seisoessa ja kävellessä, joka on tyypillinen ongelma Cerebral pareesissa. Ortoosi on hyvä vaihtoehto kun halutaan estää saksaa kävely. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasoilla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon sekä venyttäen adduktoreita.

Lantio-osa on polyetyleenia ja ulottuu L2/L3 tasolta häntäluun distaaliseen osaan antaen maksimaalisen tuen vartalolle ja lonkalle. Potilaat, joilla on heikko keskivartalon lihaksisto tai rajoittunut keskivartalon stabiileetti voivat hyötyä mallin tarjoamasta lisääntyneestä posteriorisesta ja lateralisesta tuesta. STEADY:ssä on pehmeä ja kulutuskestävä pintamateriaali. Soljet ovat helppo- ja nopeakäyttöiset riisussa ja pukiessa. Koosta 2 kokoon 4 on lantion rakenteessa matala profiili. Reisitangon halkaisija on 6 mm koossa 1 ja 8mm koossa 2-4. Reisitankojen kulmat ovat 115° ja 123°.

Tuote vaatii reisitangon ja reisosan ollakseen kokonainen.

Käyttöalueet: Cerebral pares ja saksaa käynti tai instabiileetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio. Maksimaalisen hallinnan ollessa tarpeen; esim. potilas joka tarvitsee lihasvoimaa tai lisää keskivartalon hallintaa pystyäkseen istumaan suorassa. Kun potilas on primäärisesti liikkumaton.

Kontraindikaatiot: Dislokoitunut lonkka. Kun lonkan fleksiokontraktuura on suurempi kuin 20 astetta (dynaaminen tai jäykistynyt). Kun adduktorien voima estää ortoosin käytön. Kun adduktorit ovat liian lyhyet ja estävät SWASH:n käytön istuessa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28852	STEADY Vyötäröosa	1	40-46,5 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	2	46-55 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	3	54-63 cm
28852	STEADY Vyötäröosa	4	62-72 cm

SWASH® GO Vyötäröosa

SWASH® GO korvaa SWASH® Low Profile ortoosin. Tuotetta on jatkokehitetty niin, että sen rakennetta ja ulkonäköä on parannettu. SWASHin tarkoitus on estää liiallinen lonkan adduktio istuessa, seisossa ja kävellessä, mikä on tyypillinen ongelma Cerebral pareesissa. Ortoosi on hyvä vaihtoehto saksaaalle kävelyllä. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasolla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon ja samalla venyttäen adduktoreja.

SWASH® GO:ssa on matalampi lantio-osa taivutettavalla iliacatangolla. Sitä suositellaan potilaille, joilla on parempi vartalon hallinta ja aktiivisemmille käyttäjille, kuten esim. kävelijöille. SWASH® GO:n pintamateriaali on pehmeä ja kulutuskestävä. Solki on helppo ja nopeakäyttöinen riisuessa ja pukiessa. Reisitangon halkaisija on 8 mm kaikissa kuudessa koossa. Reisitankoa saa kulmilla 115° ja 123°. Tuote vaatii reisitangon ja reisisosan ollakseen kokonainen.

Käyttöalueet: Cerebral pares ja saksaa käynti tai instabiliteetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio. SWASH® GO on tarkoitettu potilaille, joilla on hyvä selän asennon hallinta, ja aktiivisemmille käyttäjille.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28853	GO Vyötäröosa	1	40-46,5 cm
28853	GO Vyötäröosa	2	46-55 cm
28853	GO Vyötäröosa	3	54-63 cm
28853	GO Vyötäröosa	4	62-72 cm
28853	Go Vyötäröosa	5	71-81 cm
28853	Go Vyötäröosa	6	80-90 cm



SWASH® STEADY ja GO Reisisosa

Kokonaiseen SWASH® STEADY tai GO tuotteeseen tarvitaan vyötäröosa, reisisosa ja reisitanko.

Vyötärö- ja reisisassa on miellyttävän pehmeä ja kulutuskestävä päällysmateriaali sekä pikalukko/kiinnitys, joka on helpompi ja nopeakäyttöinen riisuutuessa ja pukeutuessa.

Koska reisitangolla on sama halkaisija kaikissa kokovaihtoehdoissa (poikkeuksena koko 1) on yksinkertaista yhdistää eri kokoja niin vyötäröosassa kuin reisisassa.

Reisitangon halkaisija Steady ortoosin koossa 1 on 6 mm ja muissa 8 mm.

Reisitangon kulmavaihtoehdot ovat 115° ja 123°.


Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta
28854	STEADY Reisisosa	1	21-25 cm
28854	GO Reisisosa	1	21-25 cm
28854	STEADY & GO reisisosa	2	25-29 cm
28854	STEADY & GO reisisosa	3	29-33 cm
28854	STEADY & GO reisisosa	4	33-38 cm
28854	STEADY & GO reisisosa	5	38-44 cm
28854	STEADY ja GO Reisisosa	6	44-50 cm

SWASH® STEADY ja GO Reisitanko


Kokonaiseen SWASH® STEADY tai GO tuotteeseen tarvitaan vyötäröosa, reisosia ja reisitanko.

Koska reisitangolla on sama halkaisija kaikissa kokovaihtoehdoissa (poikkeuksena koko 1) on yksinkertaista yhdistää eri kokoja niin vyötäröosassa kuin reisosassa.

Reisitanko on halkaisijaltaan 6 mm koossa 1. Koossa 2, 3 ja 4 on reisitanko halkaisiltaan 8 mm. Reisitangot ovat kulmissa 115° ja 123°.

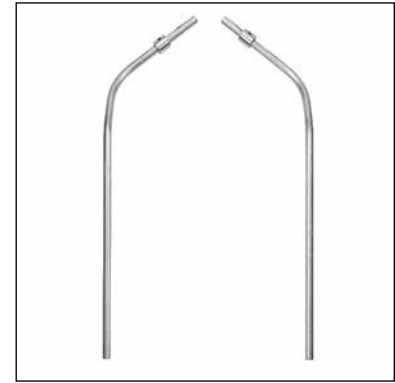

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Halkaisija
28855	STEADY Reisitankosetti 115°	1	31 cm	6 mm
28855	GO Reisitankosetti 115°	1	31 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	2	37,5 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	3	44 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	4	48 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	5	54 cm	8 mm
28855	STEADY & GO reisitankosetti 115°	6	60 cm	8 mm
28856	STEADY reisitankosetti 123°	1	31 cm	6 mm
28856	GO reisitankosetti 123°	1	31 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	2	37,5 cm	8 mm
28856	STEADY og GO reisitankosetti 123°	3	44 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	4	48 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	5	54 cm	8 mm
28856	STEADY & GO reisitankosetti 123°	6	60 cm	8 mm

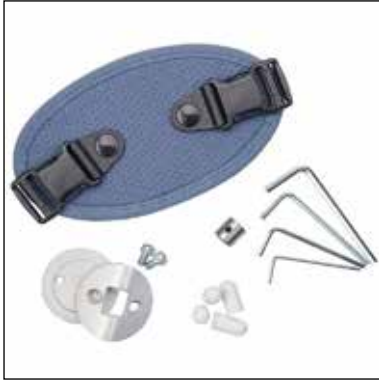


SWASH® STEADY ja GO Varusteet

SWASH® STEADY ja GO ortooseihin kuuluu erilaisia varusteita ja vaihtoehtoja, esim. tekstiilinen vyötäröosa, josta on kummallekin oma versio. Tekstiilinen reisiosa on yhteinen molemmille malleille. Vatsalevy on myös yhteinen komponentti sekä STEADY että GO-mallille. Lisäksi eri varusteita/varaosia voidaan tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pakkaus
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	1	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	2	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	3	1 setti
28857	STEADY tekstiilinen vyötäröosa	4	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	1	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	2	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	3	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	4	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	5	1 setti
28858	GO tekstiilinen vyötäröosa	6	1 setti
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	1	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	2	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	3	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	4	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	5	1 pari
28859	STEADY & GO tekstiilinen vyötäröosa	6	1 pari
28860	STEADY & GO vatsalevy	1	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	2	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	3	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	4	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	5	1 kpl
28860	STEADY & GO vatsalevy	6	1 kpl
28861	STEADY ruuviseti 6 mm	1	1 setti
28861	STEADY & GO ruuviseti 8 mm	1-6	1 setti
28862	STEADY lukitusrenas setti 6 mm	1	2 kpl
28862	STEADY & GO lukitusrenas setti 8 mm	1-6	2 kpl
28863	STEADY muovisuoja niveleeseen	1	2 kpl
28864	STEADY kumisuoja reisitankoon 6 mm	1	2 kpl
28864	STEADY kumisuoja reisitankoon 8 mm	1-6	10 kpl
28865	STEADY messinkiset hylsyt	1	10 kpl
28866	STEADY lonkkanivelen säätösetti 6 mm	1	2 kpl
28866	STEADY lonkkanivelen säätösetti 8 mm	2-4	2 kpl
28867	GO lonkkanivelen säätösetti 8 mm	1-6	2 kpl
28868	STEADY & GO kuusiokoloavainsetti	1-6	1 setti
28869	STEADY & GO muovisolki 25 mm	1-3	2 kpl
28869	STEADY & GO muovisolki 38 mm	4-6	2 kpl

STEADY & GO OSAT

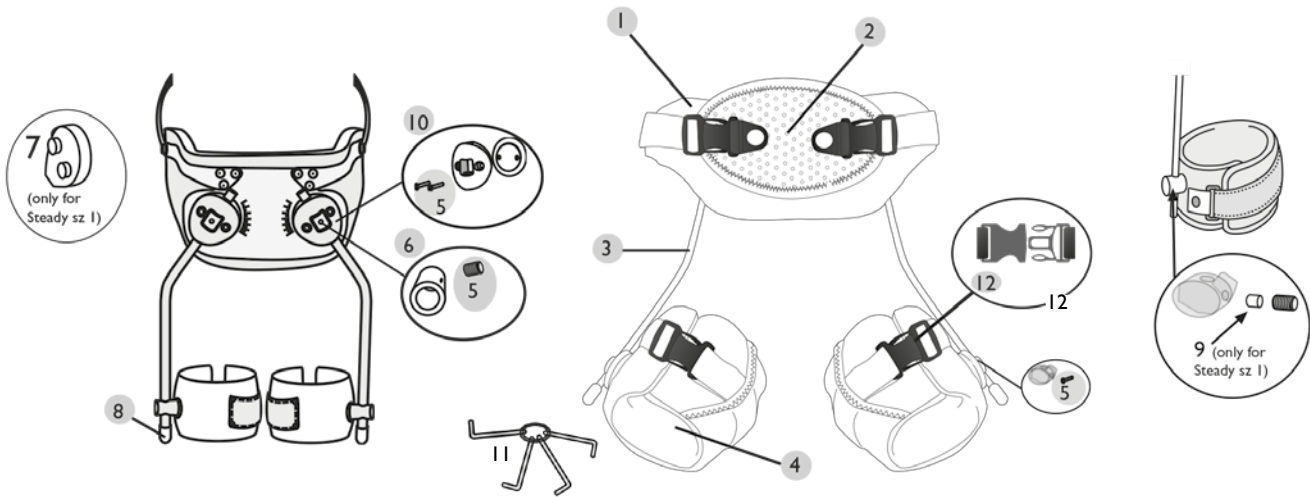

Nr.	Kuvaus	Yksikkö	STEADY	GO
1	Kankainen vyötäröosa sis. vatsalevyn	1 setti	28857	28858
2	Vatsalevy	1 kpl	28860	28860
3	Reisitanko 6 mm 115°, koko 1	Pari	28855-06	
3	Reisitanko 8 mm 115°	Pari	28855-08	28855-08
3	Reisitanko 6 mm 123°, koko 1	Pari	28856-06	
3	Reisitanko 8 mm 123°	Pari	28856-08	28856-08
4	Kankainen reisiosa	Pari	28859	28859
5	Ruuisetti, koko 1	1 setti	28861-06	
5	Ruuisetti, koko 2 - 6	1 setti	28861-08	28861-08
6	Lukitusrenkas, koko 1	2 kpl	28862-06	
6	Lukitusrenkas, koko 2 - 6	2 kpl	28862-08	28862-08
7	Muovisuoja niveleeseen, koko 1	2 kpl	28863-06	
8	Kumisuoja reisitankoon, koko 1	2 kpl	28864-06	
8	Kumisuoja reisitankoon, koko 2 - 6	10 kpl	28864-08	28864-08
9	Messinkiset hylsyt, koko 1	10 kpl	28865	
10	Lonkkanivelen säätösetti, koko 1	2 kpl	28866-06	
10	Lonkkanivelen säätösetti, koko 2 - 6	2 kpl	28866-08	28867-08
11	Kuusiokoloavainsetti	1 setti	28868	28868
12	Muovisolki 25 mm, koko 1 - 3	2 kpl	28869-25	28869-25
12	Muovisolki 38 mm, koko 4 - 6	2 kpl	28869-38	28869-38



Mitta: Etäisyys polvinivelten välillä abduktiossa

Lonkan abduktiotuki C29

Muovinen abduktiotuki, jossa on pehmustetut reunat. Asentoa ohjaavat kiskot edessä ja takana ovat ruostumatonta terästä. Selkälevy ja rintakehän yli kulkeva nauha antavat sivuttaistukea. Ilmava ja hygieeninen. Tukea voidaan käyttää vaipan kanssa.

Käyttöalueet: Käytetään synnyntäisissä lonkkanivelen luksaatioissa.

Tuotenro.	Koko	Mitta
20290	X-Small	14-17 cm
20290	Small	18-23 cm
20290	Medium	25-30 cm
20290	Large	33-38 cm



Säädettävä abduktiotuki

Tukee lantiota lonkan kehityksen aikana lonkan dysplasiassa ja käytetään myös lonkan dislokaation jälkeen vauvoilla Reisiluut sijoitetaan siten, että reisiluun pää kiinnittyy Acetabulumiin, jotta estetään ei-toivotut liikkeet ja lonkan (sub) luxaation riski. Ortoosi ohjaa lonkkanivelen 90° koukistus- ja 60° abduktioasentoon.

Käyttöalueet: Lonkan dysplasia, lonkan dislokaatio tai sublukaatio.

Tuotenro.	Koko
20291	Yksi koko



Lonkan abduktio-ortoosi

Lapsille tarkoitettu lonkkaortoosi. Ortoosia käytetään Perthesin taudin sekä muiden lonkkaan liittyvien sairauksien hoidossa. Ekstensiota ja fleksiota voidaan säätää 20° välein. Muovirunko ja teräskiskot tekevät tuesta kevyen. Pehmeuste on irrotettava ja sen voi pestä koneessa.

Käyttöalueet: Perthesin tauti ja muut lonkkaan liittyvät sairaudet.

Muuta: Lisäpehmusteen voi tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion leveys M-L
28600	Lonkan abduktio-ortoosi	Small	<21 cm
28600	Lonkan abduktio-ortoosi	Large	>21 cm
28601	Lisäpehmuste	Small	
28601	Lisäpehmuste	Large	

Maple Leaf -lonkkaortoosi

Ortoosi säilyttää lihasten pituuden ja estää näin epämuodostumien syntymisen lonkan pehmytkudosleikkauksen jälkeen. Nivelet mahdollistavat lonkkanivelen sijoittamisen anatomisen linjan lähelle. Sekä leveyttä että pituutta voidaan säätää. Tukea voidaan säätää ekstensioon/fleksioon 20° välein, abduktioon/adduktion 9° välein sekä kiertoa transversaalitasossa. Ortoosi on muovirunkoinen, jossa on teräskiskot ja irrotettava pehmuste. Koko X-Small on valmiiksi asennettu 15° abduktioon ja sitä voidaan halutessa lisätä tai pienentää. X-Small koon kiertoa ei voi säätää transversaalitasossa. Valmistettu muovista, jossa teräskiskot. Irrotettava pehmuste.

Käyttöalueet: Käytetään postoperatiivisesti ja CP-oireyhtymissä.

Tuotenro.	Koko	Lantion leveys M-L
62786	X-Small	15 - 19 cm
62786	Small	20 - 24 cm
62786	Medium	25 - 29,5 cm
62786	Large	30 - 34,5 cm





Maple Leaf DE

Maple Leaf on nyt myös saatavana distaalilla jatko-osalla henkilöille, jotka tarvitsevat lisää rajoitusta lantion rotaatioon. Polvinivel voidaan lukita sekä säätää ekstensioon/fleksioon 20° välein ja abduktioon/adduktkioon 9° välein. Muutoin ortoosissa on samat ominaisuudet kuten Maple Leafissa tuotenro:lla 62786. Ortoosi on muovirunkoinen, jossa on teräskiskot ja irrotettava pehmuste. Lantio,- reisi,- ja pohjeosiin voidaan tilata vaihtopehmusteet ja -nauhat.

Käyttöalueet: CP ja postoperatiivisesti. Tarvittaessa antamaan lisää rajoitusta lantion rotaatioon.

Muuta: Lisäpehmusteen voi tilata erikseen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion leveys M-L
62787	Maple Leaf DE (sis. kaikki osat)	Small	20 - 24 cm
62787	Maple Leaf DE (sis. kaikki osat)	Large	30 - 34,5 cm
62793	Lisäpehmuste pohjeosaan	Small	
62793	Lisäpehmuste pohjeosaan	Large	
62794	Lisänauha pohjeosaan	Small	
62794	Lisänauha pohjeosaan	Large	
62796	Lisäpehmuste lantio-osaan	Small	
62796	Lisäpehmuste lantio-osaan	Large	
62797	Lisäpehmuste reisosaan	Small	
62797	Lisäpehmuste reisosaan	Large	
62798	Lisänauha lantio-osaan	Small	
62798	Lisänauha lantio-osaan	Large	
62799	Lisänauha reisosaan	Small	
62799	Lisänauha reisosaan	Large	